



CHARIOTS D'URGENCE CHARIOT SÉCURISÉ À TIROIRS JOINTIFS - MM3 (MOD'ALLI)



Ambulatoire - Soins ambulatoires



Sommaire

| | |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|
| HAcare Médical, spécialiste des dispositifs médicaux depuis 1860 | 3 |
| Nos engagements | 4 |
| Choisir l'économie circulaire | 5 |
| Matériaux recyclables | 6 |
| Certifications | 7 |
| Chariots d'urgence Hôpital Soins ambulatoires | 8 |
| Nos exclusivités | |
| Soft Sound | 10 |
| Easy Clip | 11 |
| Scellé numéroté | 12 |
| EasyMov et la 5 ^e roue motorisée | 13 |
| Nos points forts | |
| Protéger et verrouiller (Tiroirs jointifs) | 15 |
| Identification facilitée (Identification) | 16 |
| Une modularité dédiée à l'Urgence (Configurable) | 17 |
| Plateau sécurisé pour une préparation fiable (Surface de travail) | 18 |
| Tablette extensible (Optimiser l'espace) | 19 |
| Rail porte-accessoires (Easy Clip) | 20 |
| Faciliter le nettoyage (Easy CLEAN) | 21 |
| Les caractéristiques | |
| Mobilité | 23 |
| Configurable | 24 - 25 |
| COMPOSANTS : Tiroirs | 26 - 27 |
| Spécificités techniques | 28 |
| Options, Accessoires, Composants & Nuancier | 32 |
| Une maintenance préventive qui s'adapte à vous | 45 |
| Les avantages de la maintenance préventive | 46 |
| Nos prestations de maintenance préventive | 47 |





HAcare Médical, spécialiste des dispositifs médicaux depuis 1860

Chez HAcare, nous concevons, fabriquons et distribuons des dispositifs médicaux et des solutions de mobilier médical innovant et durable, pensées pour améliorer le quotidien des patients comme des professionnels de santé.



Les engagements éco-responsables du groupe HAcare

Le groupe HAcare s'engage pour une **orientation industrielle éco-responsable**

Dans sa stratégie de développement durable, le groupe HAcare a défini une liste de **6 engagements** qui guident ses **actions et décisions** depuis la création du groupe et pour les années à venir.

Des indicateurs ont été mis en place pour chaque engagement.

Nos 6 engagements



Une production Made in France



L'utilisation de ressources renouvelables



Intégration de l'économie circulaire dans tout nouveau développement produit



Des achats responsables (suivi qualité fournisseurs)



Des actions au quotidien pour le respect et la protection de l'environnement



Une lutte contre les TMS, et les nuisances sonores à travers nos produits

Choisir l'économie circulaire



Les produits finis HAcare sont recyclables au travers d'un circuit de récupération chez le client final, pour recyclage avec notre fournisseur partenaire. Le bois ne pouvant être recyclé à l'infini car ses fibres deviennent trop petites ou s'épuisent, les déchets de bois sont alors récupérés et transformés en énergie verte.



Les panneaux en fibre végétale utilisés dans la fabrication des produits du groupe HAcare sont 100% bois de réemploi. Chaque produit fini HAcare porte un indice révélant la part de fibre végétale contenue.



Le recyclage est la pratique consistant à récupérer les matériaux usagés du flux de déchets, puis à incorporer ces mêmes matériaux dans le processus de fabrication. Chaque produit fini HAcare porte un indice révélant la part de matière recyclée contenue.



Matériaux recyclables

Les produits finis HAcare sont recyclables à 95%. Par exemple, le lit médicalisé HAcare est entièrement recyclable sauf les roues et les moteurs. Chaque lit est démontable pour récupérer séparément chaque matériau : fibre végétale, métal, plastique.



Le bois de réemploi

Les panneaux en fibre végétale utilisés dans la fabrication des produits du groupe HAcare sont :

100% en bois de réemploi

Le réemploi est un des procédés respectueux de l'environnement. Il s'agit par exemple de restes d'entreprises de transformation du bois (par exemple, les restes de scieries, les chutes de production...). Mais aussi de sous-produits d'activités telles que la gestion forestière durable et l'entretien des talus.

100% bois certifié FSC

Recyclables avec un fournisseur partenaire qui, en exclusivité mondiale et depuis 2021, recycle les panneaux MDF et HDF. Pas de consommation d'eau, ni d'énergie verte **biomasse**.



Le métal

Toutes les composantes en métal sont **recyclables** et réutilisables, et ce, **à l'infini**. Une fois le métal trié, il est compressé, broyé, laminé et fondu. Il est ensuite remoulé sous forme de bobines, de barres ou de fils pour la réutilisation. Ce procédé peut se faire sans fin !

Le recyclage des métaux présente de **nombreux avantages**. Il préserve les ressources naturelles en réduisant les besoins en matériaux vierges, diminue la consommation d'énergie et les émissions de **gaz à effet de serre**.



Le plastique recyclé

Au sein des usines de recyclage, les déchets (re) deviennent une **matière secondaire** grâce à différents processus : broyage, micronisation, régénération des matières plastiques.

Le plastique recyclé sera alors revendu aux industriels de la **plasturgie** sous forme de **paillettes**, de poudre ou encore de **granulés**.



CHARIOTS D'URGENCE HÔPITAL

Soins ambulatoires

Chariot sécurisé à tiroirs jointifs - MM3 (MOD'ALLI)





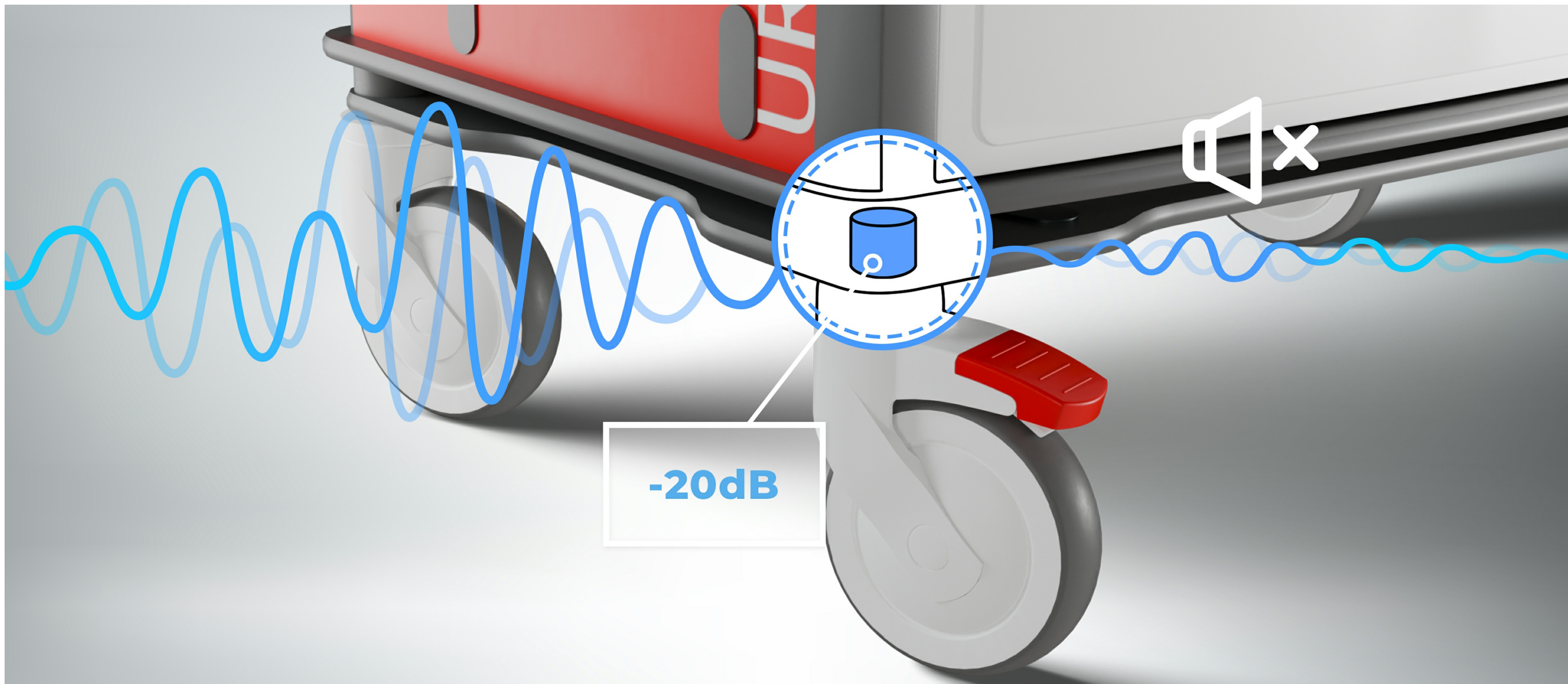
NOS EXCLUSIVITÉS

Au cours des 40 dernières années, le niveau moyen de bruit dans les hôpitaux a augmenté de 15 décibels (dB), atteignant des niveaux d'environ 70 dB, bien au-dessus de la limite recommandée par l'OMS qui est de 35 dB pour un environnement de soins. Les produits HAcare sont conçus pour lutter contre les nuisances sonores. L'objectif est de réduire de 20dB avec l'ajout d'amortisseurs sur toutes les structures roulantes et brancardables.



Lutter contre les nuisances sonores

Support **anti-vibratoire**, **amortisseur** haute performance : pour des **déplacements** fluides, **silencieux** et confortables, même en passage de seuil ou sortie d'ascenseur. Les **nuisances sonores diminuent** significativement.



Easy Clip

Dans un environnement de soins où chaque seconde compte et où l'espace est souvent limité, l'optimisation de la surface de soins devient un enjeu stratégique pour améliorer l'efficacité des équipes soignantes et la sécurité des patients.

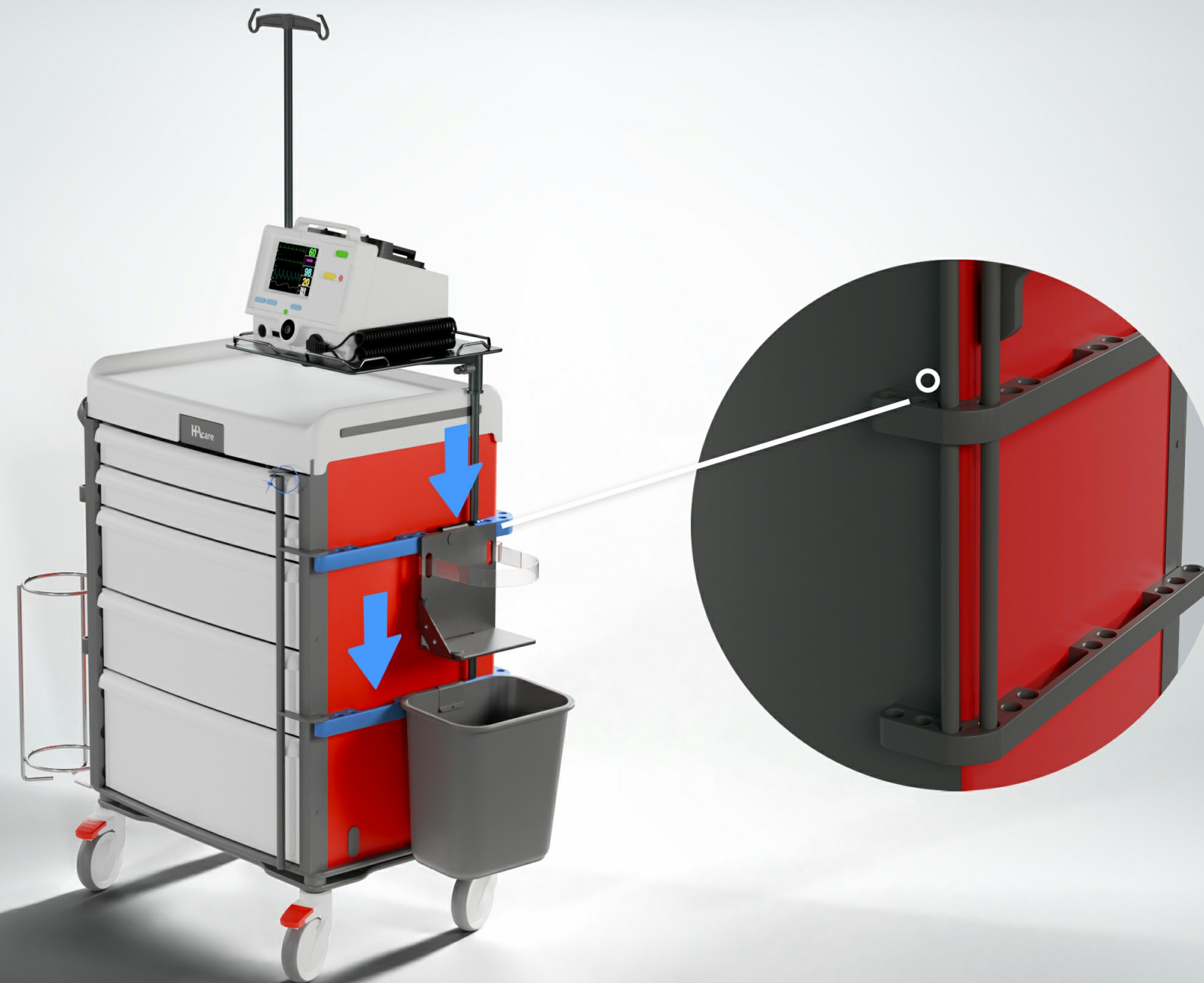
Le concept EasyClip® a été conçu pour répondre à ces contraintes avec une approche à la fois ergonomique, intuitive et modulable.



Optimiser la surface de soins

La **fixation des accessoires** se fait en un geste, **sans aucun outil**, offrant un gain de temps immédiat.

Les **accessoires**, entièrement **modulables**, s'adaptent à chaque besoin et à chaque situation de soin, pour un **travail plus fluide** et **efficace** au quotidien.





Sécurité et traçabilité renforcées

La fermeture à **scellé numéroté** protège le contenu du chariot d'urgence et assure une **traçabilité complète**. Chaque **ouverture** est **contrôlée**, garantissant sécurité, **intégrité du matériel** et **conformité** aux protocoles lors des interventions.



Dans un environnement hospitalier en constante tension, la manipulation de charges lourdes et le déplacement de brancards représentent des défis quotidiens pour les équipes médicales. Entre la saturation des services et l'étroitesse des couloirs, les risques de Troubles Musculo-Squelettiques (TMS) pour le personnel et d'inconfort pour les patients sont accrus. C'est pour répondre à ces enjeux de santé au travail et de qualité de prise en charge qu'a été développée la solution de transport assisté.



Motorisation avec la 5^e roue

La **motorisation**, associée à une **5^e roue pivotante**, offre une grande **maniabilité**. Elle **facilite** les **déplacements** avec sa **batterie escamotable, sécurisée à clé**, ses **20 km d'autonomie**, et sa **gâchette avant / arrière** équipée d'un **électro-frein**.





NOS POINTS FORTS

Protéger et verrouiller (Tiroirs jointifs)



Les **tiroirs jointifs protègent** le contenu des tiroirs des **regards** indiscrets, de la **lumière** et des **UV**, préservant ainsi la **qualité** et la **confidentialité** des produits stockés.

Grâce au système de **verrouillage centralisé**, l'ouverture et la fermeture se font **en un seul geste**, simplifiant le travail du personnel tout en renforçant la **sécurité**.

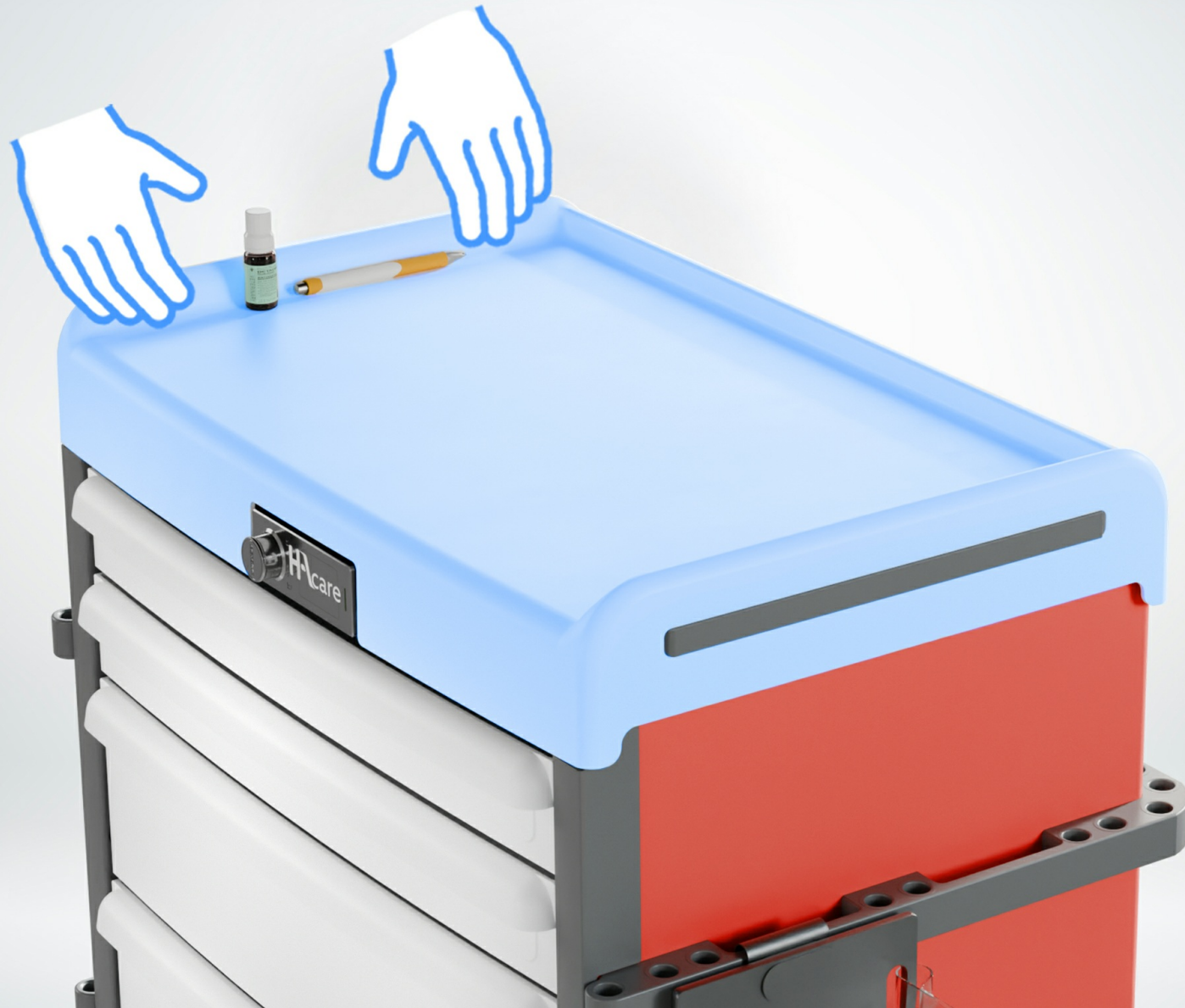
Une solution pratique et fiable pour conjuguer protection, efficacité et sérénité au quotidien.



Facilement identifiable par sa **couleur** et son **marquage**, le chariot d'urgence permet une **intervention rapide** et efficace lors des défaillances vitales. Conçu pour **optimiser l'accès** aux **équipements** et **médicaments** essentiels, il assure une réactivité maximale du personnel soignant. Décliné en **trois versions**, il peut être **standardisé** pour une utilisation universelle ou **personnalisé** selon les besoins spécifiques de chaque service



Le mobilier médical propose une **grande modularité** pour un rangement optimisé : les **petits tiroirs** pour les petits DMS (seringues, aiguilles ..), les **tiroirs intermédiaires** pour les compresses et perfuseurs, et le **grand tiroir** pour les solutés massifs, la **planche** massage cardiaque, **TPS, support monitoring** et **bouteille oxygène**. La **tablette coulissante** plutôt dédiée aux actes administratifs **augmente** la **surface de travail** et libère l'espace dédié à la préparation.




Le **plateau** du mobilier médical est conçu avec un **rebord sur trois côtés** pour garantir une **sécurité optimale** lors de la préparation des soins. Ce design **prévient les chutes d'instruments** ou **de produits**, même en cas de déplacement. Pratique et ergonomique, il permet au personnel soignant de travailler en toute confiance, avec un **espace de travail stable**, sécurisé et **facile à entretenir**. Une conception pensée pour allier sécurité, confort d'utilisation et efficacité au quotidien.

Tablette extensible (Optimiser l'espace)



La **tablette coulissante** offre une **extension** pratique de la **surface de travail**, idéale pour optimiser l'espace lors des soins. Associée à des accessoires périphériques, elle permet de **sécuriser** les **flacons** et le **matériel** tout en gardant le plateau principal dégagé. Le premier tiroir, dédié au clavier et à la souris, libère encore davantage l'espace de préparation. Un emplacement STPO complète l'ensemble pour une organisation ergonomique, fluide et parfaitement adaptée aux environnements médicaux exigeants.

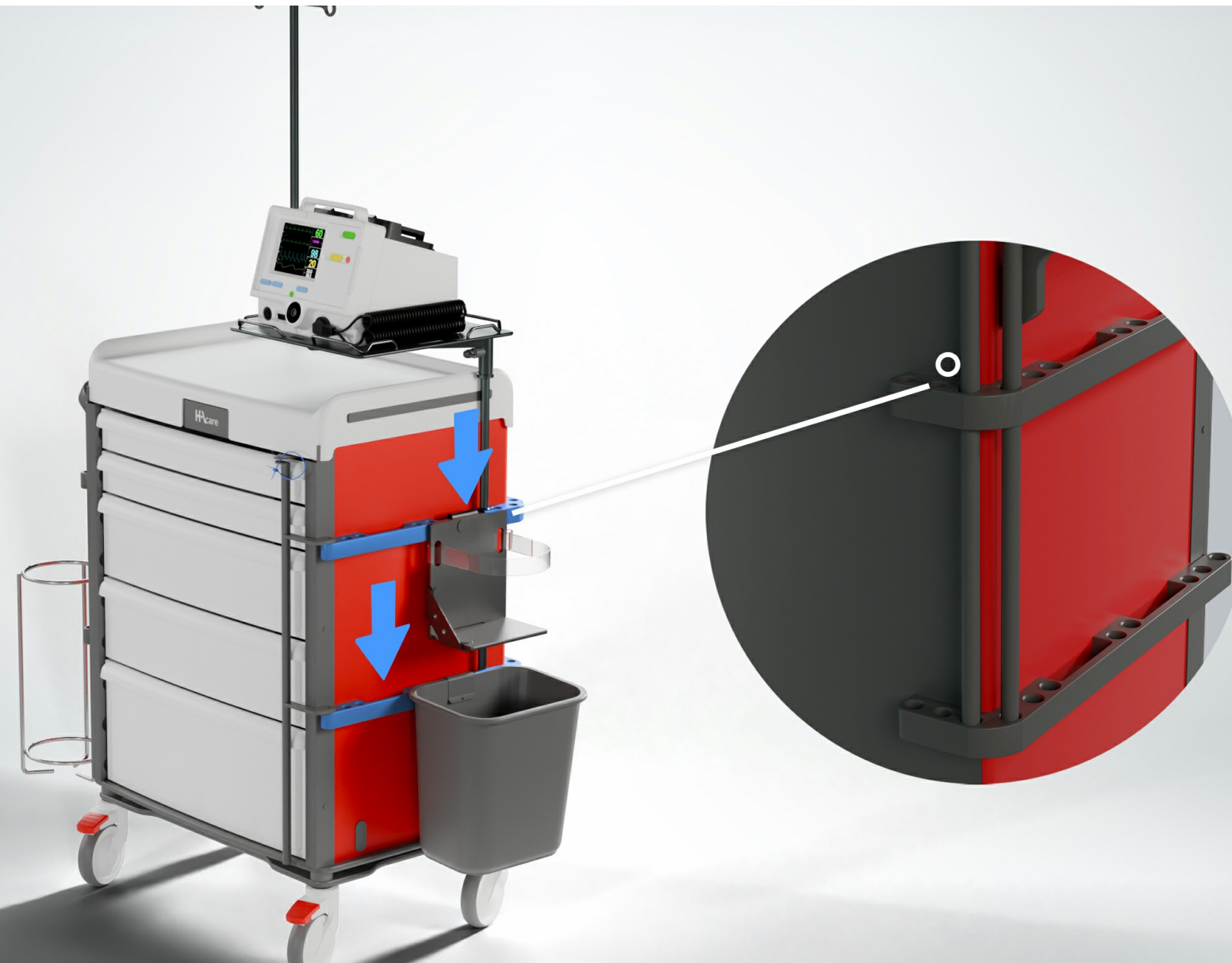Rail porte-accessoires (Easy Clip)



Choisissez vos accessoires en fonction des usages et des besoins de votre service. Notre concept **Easy Clip** permet une **installation** et une **réorganisation facile** sur rail, **sans aucun outil**. Gagnez ainsi en efficacité et en flexibilité.

Faciliter le nettoyage (Easy CLEAN)



Grâce à la solution **EasyClean®**, le **nettoyage** du mobilier médical devient **simple**, rapide et **efficace**. Le **plateau amovible** sans outil, donne un **accès total** aux surfaces à nettoyer, elles aussi amovibles.

Résultat : un **lavage intégral** en un minimum de temps, une **hygiène irréprochable**, et un vrai **gain de temps** pour le personnel soignant.



LES CARACTÉRISTIQUES



EasyMOV

Conçu pour allier confort d'utilisation et performance, notre mobilier médical offre une **maniabilité optimale** grâce à son système d'**amortisseur intégré**. Cette technologie **absorbe les vibrations** et irrégularités du sol, garantissant un **déplacement** fluide, **sécurisé** et **sans effort**, même en environnement hospitalier exigeant.

La **poignée d'aide à la poussée** facilite la **prise en main**.

Chaque mouvement est facilité, réduisant la fatigue et préservant la santé des utilisateurs au quotidien.

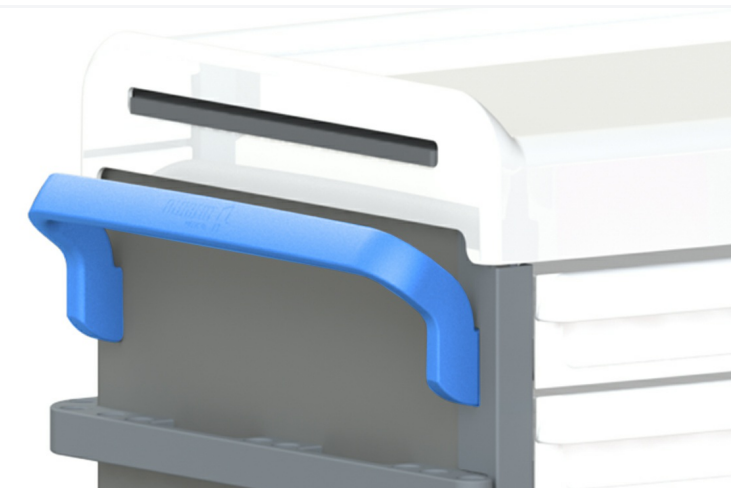
Pensé pour **limiter les troubles musculo-squelettiques (TMS)**, il permet aux soignants de travailler dans de meilleures conditions ergonomiques, tout en assurant la sécurité et la stabilité du matériel transporté.



Choix de roulettes

Le mobilier médical s'adapte à chaque environnement grâce au **choix de roulettes** de 75 mm ou 125 mm, permettant l'**optimisation** entre ajustement de la **hauteur de surface** de travail et le **confort de déplacement**.

Les **deux freins avant**, facilement accessibles au pied, assurent une **stabilité parfaite** lors des soins ou des préparations, renforçant la **sécurité** du mobilier et la confiance des soignants dans leurs gestes.




Poignées d'aide à la poussée

Conçu pour allier confort d'utilisation et performance, notre mobilier médical offre une **maniabilité optimale** et une **bonne prise en main** grâce à sa **poignée d'aide à la poussée**.

Son système d'amortisseur intégré facilite les déplacements.

Chaque **mouvement** est **fluide**, réduisant la fatigue et préservant la santé des utilisateurs au quotidien.

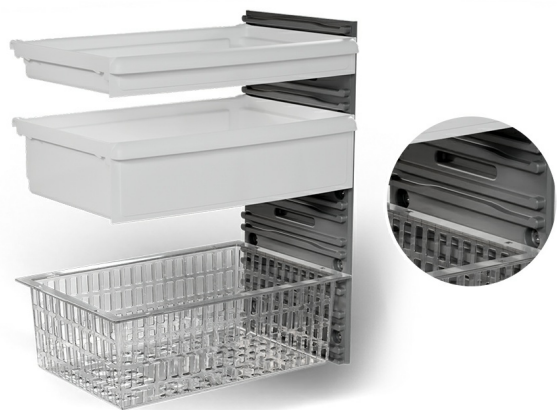Pensé pour **limiter les troubles musculo-squelettiques (TMS)**, il permet aux soignants de travailler dans de meilleures conditions ergonomiques, tout en assurant la sécurité et la stabilité du matériel transporté.



Optimiser l'espace

Le mobilier médical HACARE s'adapte à chaque usage grâce à un **large choix de composants modulables**. En version P80, il optimise le soin et offre une **grande capacité** de rangement. **Compatible** avec **tiroirs** et **bacs à lèvres normalisés**, permet une organisation claire et efficace. Idéal pour **combiner** tiroirs jointifs et étagères standards, il assure un **espace de travail pratique**, évolutif et performant au quotidien, répondant aux besoins des équipes soignantes.



Equipement de base

Le chariot d'urgence est équipé d'une **fermeture à scellé numéroté**, garantissant la traçabilité complète de son utilisation. Il dispose de **5 tiroirs fonctionnels** : **deux petits** pour les injectables, **deux moyens** pour les DMS et **un grand tiroir** dédié aux solutés. Une **organisation claire** et optimisée pour un **accès rapide**, sécurisé et efficace lors des situations critiques, permettant au personnel soignant **d'intervenir** avec **réactivité** et sérénité.



Equipement intermédiaire

Le chariot d'urgence est **verrouillable par scellé numéroté**, assurant une **traçabilité totale** de son utilisation. **En complément de l'équipement de base**, il intègre une **planche de massage cardiaque**, une **TPS** et un **support monitoring**, offrant ainsi une solution complète pour **intervenir rapidement** et efficacement lors des situations critiques. Son organisation optimise l'accès aux outils essentiels, garantissant **sécurité**, **réactivité** et **sérénité** pour le personnel soignant.



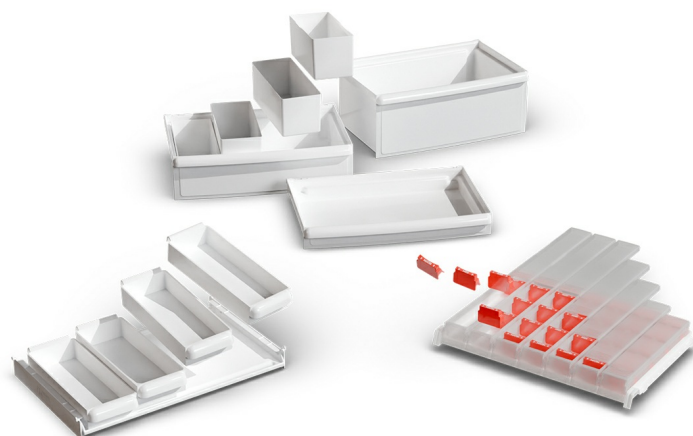
Equipement complet

Le chariot d'urgence est **verrouillable par scellé numéroté**, garantissant une **traçabilité complète** de son utilisation. **En plus de l'équipement de base**, il intègre une **planche de massage cardiaque**, une **TPS**, un **support monitoring** et un **porte-bouteille à oxygène**, offrant une solution complète pour **intervenir rapidement** et efficacement. Son organisation optimise l'accès aux outils essentiels, assurant **sécurité**, **réactivité** et **sérénité** pour le personnel soignant.



Une modularité selon l'usage

Le mobilier médical propose une **grande modularité** pour un rangement optimisé : les **petits tiroirs** pour les petits DMS (seringues, aiguilles ..), les **tiroirs intermédiaires** pour les compresses et perfuseurs, et le **grand tiroir** pour les solutés massifs. La **tablette coulissante** plutôt dédiée aux actes administratifs augmente la surface de travail et libère l'espace dédié à la préparation. Un espace dédié aux **supports informatiques** optimise et facilite le suivi patient.



Choisir les composants pour un mobilier médical sur mesure

Configurez votre mobilier médical selon vos **besoins** grâce à un large choix de **composants modulaires**. Créez une **solution sur mesure**, parfaitement adaptée à vos usages quotidiens. Chaque élément est pensé pour **optimiser** votre organisation, votre **confort** de travail et l'**efficacité** des soins, tout en garantissant une ergonomie optimale. Une personnalisation complète pour un **mobilier évolutif, durable** et en parfaite adéquation avec les exigences de votre service.



Choisir les configurations "type"

Grâce à **notre expertise** en mobilier médical, nous concevons pour vous des **configurations "type"** pensées pour chaque usage. Sélection rigoureuse de **composants** et d'**accessoires**, agencement optimisé, ergonomie et confort d'utilisation : tout est étudié pour répondre aux besoins spécifiques de chaque service. **Notre équipe vous accompagne** pour définir la configuration la plus adaptée à vos pratiques, en alliant fonctionnalité, durabilité et efficacité au quotidien.

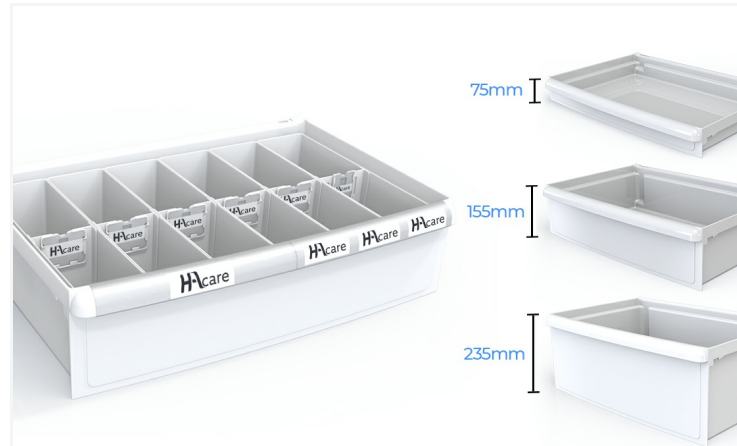


Les **tiroirs jointifs protègent** le contenu des tiroirs **des regards** indiscrets, de la **lumière** et des **UV** , préservant ainsi la qualité et la **confidentialité** des produits stockés.

Grâce au système de **verrouillage centralisé** , l'ouverture et la fermeture se font en **un seul geste** , simplifiant le travail du personnel tout en renforçant la sécurité.


Les **tiroirs amovibles** peuvent être **nettoyés en autoclave** , les **angles rayonnés** facilitent le nettoyage.

Une solution pratique et fiable pour conjuguer protection, efficacité et sérénité au quotidien.



Des tiroirs ergonomiques

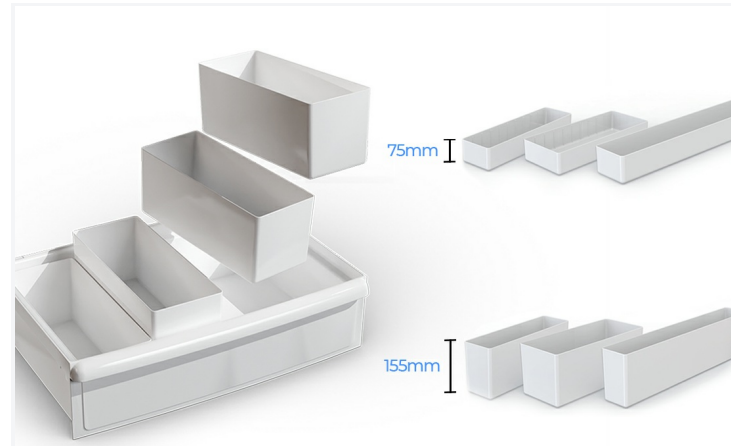
Le mobilier médical s'**adapte** à chaque organisation de soins grâce à ses **configurations personnalisables**. Choisissez parmi 3 hauteurs de tiroirs et **composez librement** l'aménagement intérieur selon vos besoins.



Les bacs de séparation


Le mobilier médical s'**adapte** à **chaque organisation** de soins grâce à ses **configurations personnalisables**. Choisissez parmi 3 hauteurs de tiroirs et composez librement l'**aménagement intérieur** selon vos besoins avec les **bacs de séparation**.

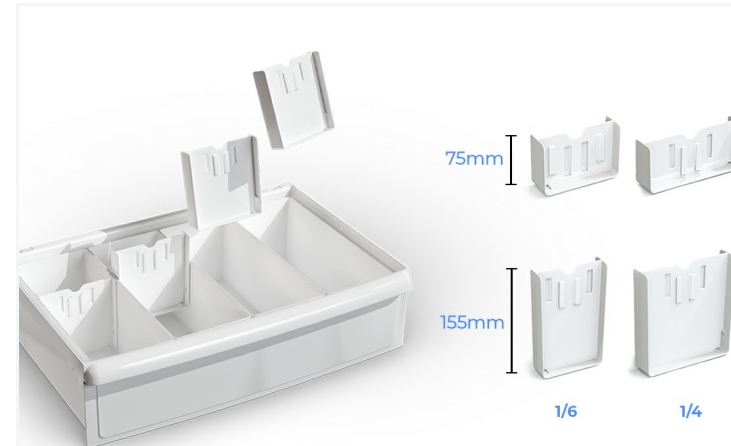Une conception **flexible** et **évolutive** qui permet d'**optimiser l'espace**, d'améliorer l'ergonomie et de rendre chaque poste de soin plus fonctionnel au quotidien.



Les séparateurs

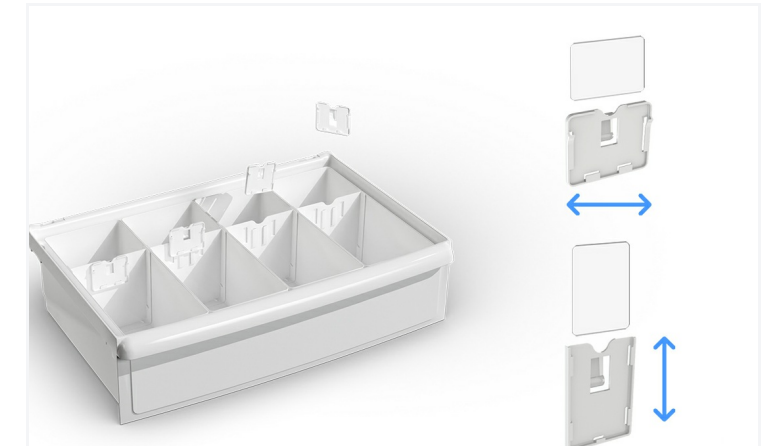Composez librement l'**aménagement intérieur** selon vos besoins grâce aux bacs de séparations et aux **séparateurs, peignes de séparation**, boîtes de subdivision qui isolent chaque élément de soin pour une **plus grande sécurité**. Une **conception flexible** et **évolutive** qui permet d'**optimiser l'espace**, d'améliorer l'ergonomie et de rendre chaque poste de soin plus fonctionnel au quotidien.



Les porte-étiquettes et étiquettes

Les porte-étiquettes sur les tiroirs du mobilier médical facilitent l'**identification rapide** et précise du contenu, **réduisant les erreurs** et optimisant l'**organisation des soins**. Ils permettent un **repérage clair** des médicaments, dispositifs médicaux ou fournitures, améliorant ainsi la **productivité** et la **fluidité du travail** des équipes. Adaptables et **modulables**, ils contribuent à un environnement de soins structuré et **sécurisé**, tout en **simplifiant** la **gestion quotidienne** du matériel et en renforçant l'efficacité et la sécurité des interventions.

POIDS - ECO-PERFORMANCES

| | |
|---------------------------------------|---------|
| Poids structure nue | 27,6 kg |
| Poids Total Pack | 41,2 kg |
| Pourcentage végétal (sur poids total) | 60% |
| Pourcentage matière recyclée | 25% |

DIMENSIONS

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Largeur | 78,2 cm |
| Profondeur | 49,8 cm |
| Hauteur plateau | 101,2 cm |
| Façade | F600 |
| Hauteur | 104,2 cm |
| Epaisseur | Caisson : 1 / Dos : 0,6 cm |

TYPE

| | |
|------------------|----------------------------------------------|
| Type de freinage | Freinage Individuel sur les roulettes avants |
|------------------|----------------------------------------------|

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

| | |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|
| Structure Plateau | ABS PMMA thermoformé, ép. 4 mm, rebords de 30 mm sur 3 côtés |
| Caisson | Fibres végétales |
| Poignées | PA6 chargé fibres de verre |
| Roues | Bandage polyuréthane non tachant |
| Matière | Rails Easyfix en PA6 chargé fibres de verre |
| Sommier / Glissière | ABS noir |

PIÈTEMENT

| | |
|-------------------|----------------------------------|
| Type de piètement | Roulettes pivotante simple galet |
| Diamètre roues | 125 mm |

TYPE DE FIXATION

| | |
|---------------------|------------------------|
| Sommier / Glissière | Sans outils par volant |
|---------------------|------------------------|

CHARGE DE SÉCURITÉ

| | |
|----------------------------|--------|
| Charge maximale admissible | 100 kg |
|----------------------------|--------|

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

| | |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|
| Nombre de glissières (hauteur G) | 9G |
| Type de sommier | Mixte uniquement |
| Sommier Mixte : Tiroir hauteur 75 mm | 9 |
| Sommier Mixte : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm | 8 |
| Sommier Mixte : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm | 9 |

CLASSEMENT FEU

| | |
|------------------|--------|
| Plastique | M2 |
| Plastique ABS | M2 |
| Fibres végétales | D-s2d0 |

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

| | |
|---------------------------------------------------|-------|
| Niveau de bruit généré par le produit en fonction | 42 db |
|---------------------------------------------------|-------|

COMPOSITION

| | |
|---|-----------------------------|
| • | 2 tiroirs 75 |
| • | 2 tiroirs 155 |
| • | 1 tiroir 235 |
| • | planche à massage cardiaque |

9G



NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- Tiroirs jointifs
- Identification
- Configurable
- Surface de travail
- Optimiser l'espace
- Easy Clip
- Easy CLEAN

POIDS - ECO-PERFORMANCES

| | |
|---------------------------------------|---------|
| Poids structure nue | 27,6 kg |
| Poids Total Pack | 46,5 kg |
| Pourcentage végétal (sur poids total) | 60% |
| Pourcentage matière recyclée | 25% |

DIMENSIONS

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Largeur | 78,2 cm |
| Profondeur | 49,8 cm |
| Hauteur plateau | 101,2 cm |
| Façade | F600 |
| Hauteur | 104,2 cm |
| Epaisseur | Caisson : 1 / Dos : 0,6 cm |

TYPE

| | |
|------------------|----------------------------------------------|
| Type de freinage | Freinage Individuel sur les roulettes avants |
|------------------|----------------------------------------------|

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

| | |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|
| Structure Plateau | ABS PMMA thermoformé, ép. 4 mm, rebords de 30 mm sur 3 côtés |
| Caisson | Fibres végétales |
| Poignées | PA6 chargé fibres de verre |
| Roues | Bandage polyuréthane non tachant |
| Matière | Rails Easyfix en PA6 chargé fibres de verre |
| Sommier / Glissière | ABS noir |

PIÈTEMENT

| | |
|-------------------|----------------------------------|
| Type de piètement | Roulettes pivotante simple galet |
| Diamètre roues | 125 mm |

TYPE DE FIXATION

| | |
|---------------------|------------------------|
| Sommier / Glissière | Sans outils par volant |
|---------------------|------------------------|

CHARGE DE SÉCURITÉ

| | |
|----------------------------|--------|
| Charge maximale admissible | 100 kg |
|----------------------------|--------|

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

| | |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|
| Nombre de glissières (hauteur G) | 9G |
| Type de sommier | Mixte uniquement |
| Sommier Mixte : Tiroir hauteur 75 mm | 9 |
| Sommier Mixte : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm | 8 |
| Sommier Mixte : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm | 9 |

CLASSEMENT FEU

| | |
|------------------|--------|
| Plastique | M2 |
| Plastique ABS | M2 |
| Fibres végétales | D-s2d0 |

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

| | |
|---------------------------------------------------|-------|
| Niveau de bruit généré par le produit en fonction | 42 db |
|---------------------------------------------------|-------|

COMPOSITION

- 2 tiroirs 75
- 2 tiroirs 155
- 1 tiroir 235
- planche à massage cardiaque
- tige porte-sérum
- support bouteille à oxygène



9G

NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- Tiroirs jointifs
- Identification
- Configurable
- Surface de travail
- Optimiser l'espace
- Easy Clip
- Easy CLEAN

POIDS - ECO-PERFORMANCES

| | |
|---------------------------------------|---------|
| Poids structure nue | 27,6 kg |
| Poids Total Pack | 48,4 kg |
| Pourcentage végétal (sur poids total) | 60% |
| Pourcentage matière recyclée | 25% |

DIMENSIONS

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Largeur | 78,2 cm |
| Profondeur | 49,8 cm |
| Hauteur plateau | 101,2 cm |
| Façade | F600 |
| Hauteur | 104,2 cm |
| Epaisseur | Caisson : 1 / Dos : 0,6 cm |

TYPE

| | |
|------------------|----------------------------------------------|
| Type de freinage | Freinage Individuel sur les roulettes avants |
|------------------|----------------------------------------------|

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

| | |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|
| Structure Plateau | ABS PMMA thermoformé, ép. 4 mm, rebords de 30 mm sur 3 côtés |
| Caisson | Fibres végétales |
| Poignées | PA6 chargé fibres de verre |
| Roues | Bandage polyuréthane non tachant |
| Matériau | Rails Easyfix en PA6 chargé fibres de verre |
| Sommier / Glissière | ABS noir |

PIÈTEMENT

| | |
|-------------------|----------------------------------|
| Type de piétement | Roulettes pivotante simple galet |
| Diamètre roues | 125 mm |

TYPE DE FIXATION

| | |
|---------------------|------------------------|
| Sommier / Glissière | Sans outils par volant |
|---------------------|------------------------|

CHARGE DE SÉCURITÉ

| | |
|----------------------------|--------|
| Charge maximale admissible | 100 kg |
|----------------------------|--------|

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

| | |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|
| Nombre de glissières (hauteur G) | 9G |
| Type de sommier | Mixte uniquement |
| Sommier Mixte : Tiroir hauteur 75 mm | 9 |
| Sommier Mixte : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm | 8 |
| Sommier Mixte : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm | 9 |

CLASSEMENT FEU

| | |
|------------------|--------|
| Plastique | M2 |
| Plastique ABS | M2 |
| Fibres végétales | D-s2d0 |

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

| | |
|---------------------------------------------------|-------|
| Niveau de bruit généré par le produit en fonction | 42 db |
|---------------------------------------------------|-------|

COMPOSITION

- 2 tiroirs 75
- 2 tiroirs 155
- 1 tiroir 235
- planche à massage cardiaque
- tige porte-sérum
- support bouteille oxygène
- support monitoring
- poubelle 13L
- support boîte à aiguille



9G

NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- Tiroirs jointifs
- Identification
- Configurable
- Surface de travail
- Optimiser l'espace
- Easy Clip
- Easy CLEAN

Spécificités techniques

POIDS - ECO-PERFORMANCES

| | |
|---------------------------------------|---------|
| Poids structure nue | 28,6 kg |
| Pourcentage végétal (sur poids total) | 60% |
| Pourcentage matière recyclée | 25% |

DIMENSIONS

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Largeur | 78,2 cm |
| Profondeur | 49,8 cm |
| Hauteur plateau | 101,2 cm |
| Façade | F600 |
| Hauteur | 104,2 cm |
| Epaisseur | Caisson : 1 / Dos : 0,6 cm |

TYPE

| | |
|------------------|----------------------------------------------|
| Type de freinage | Freinage Individuel sur les roulettes avants |
|------------------|----------------------------------------------|

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

| | |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|
| Structure Plateau | ABS PMMA thermoformé, ép. 4 mm, rebords de 30 mm sur 3 côtés |
| Caisson | Fibres végétales |
| Poignées | PA6 chargé fibres de verre |
| Roues | Bandage polyuréthane non tachant |
| Matière | Rails Easyfix en PA6 chargé fibres de verre |
| Sommier / Glissière | ABS noir |

PIÈTEMENT

| | |
|-------------------|----------------------------------|
| Type de piétement | Roulettes pivotante simple galet |
| Diamètre roues | 125 mm |

TYPE DE FIXATION

| | |
|---------------------|------------------------|
| Sommier / Glissière | Sans outils par volant |
|---------------------|------------------------|

CHARGE DE SÉCURITÉ

| | |
|----------------------------|--------|
| Charge maximale admissible | 100 kg |
|----------------------------|--------|

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

| | |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|
| Nombre de glissières (hauteur G) | 9G |
| Type de sommier | Mixte uniquement |
| Sommier Mixte : Tiroir hauteur 75 mm | 9 |
| Sommier Mixte : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm | 8 |
| Sommier Mixte : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm | 9 |

CLASSEMENT FEU

| | |
|------------------|--------|
| Plastique | M2 |
| Plastique ABS | M2 |
| Fibres végétales | D-s2d0 |

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

| | |
|---------------------------------------------------|-------|
| Niveau de bruit généré par le produit en fonction | 42 db |
|---------------------------------------------------|-------|

MO-M60009-UR1

CHARIOT D'URGENCE MODALLI M3 - F600 9G - AVEC PORTE N - À ÉQUIPER

9G



NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- Tiroirs jointifs
- Identification
- Configurable
- Surface de travail
- Optimiser l'espace
- Easy Clip
- Easy CLEAN



OPTIONS, ACCESSOIRES, COMPOSANTS & NUANCIER

Options

OPTIONS ROUES

**ROUE DIAMÈTRE 125 MM
SIMPLE GALET
ANTISTATIQUE BLANCHE**

OP-M2110600



OPTIONS ROUES

**ROUE DIAMÈTRE 100 MM
DOUBLE GALET BLANCHE**

OP-M2110700



ROUE MOTORISÉE

**OPTION ROUE MOTORISÉE
POUR MOBILIER
MODULAIRE M3**

OP-M3EZGO



ROUE MOTORISÉE

**OPTION DÉBRAYAGE POUR
ROUE MOTORISÉE SUR
MOBILIER MODULAIRE M3**

OP-M3DEB



IDENTIFICATION

**STICKER IDENTIFICATION
PERSONNALISABLE - EN
OPTION**

OP-ID

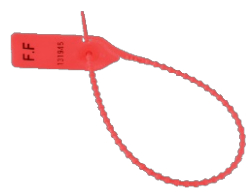


Accessoires

VERROUILLAGE

BOÎTE DE 50 SCÉLÉS ROUGES LIEN LONGUEUR 155 MM - DIAMÈTRE 3 MM - COMP. V1, V2 & M3

AC-D7910101SIRIS



VERROUILLAGE

BOÎTE DE 50 SCÉLÉS GRIS (COMP. V1, V2 & M3)

AC-D7910101



TPS SUR STRUCTURE

TIGE PORTE-SÉRUM NOIRE VOLCANIQUE (COMP. V2 & M3)

AC-M21039SI



PORTE-CONTENANT

BRIDE AVEC CROCHET (COMP. V1, V2 & M3)

AC-M77892



PORTE-CONTENANT

SUPPORT BAC À PLÂTRE SUR EASYCLIP (BAC TIROIR 1/2 HAUTEUR 155 NON INCLUS) (COMP. V2 & M3)

AC-SUPBACPLAT



PORTE-CONTENANT

BRIDE PORTE BLOUSE (COMP. V1, V2 & M3)

AC-M77929



PORTE-CONTENANT

ÉLÉMENT DE RANGEMENT LATÉRAL FILAIRE 2 ÉTAGES (SANS BAC) (COMP. V1, V2 & M3)

AC-M21021SC



PORTE-CONTENANT

ÉLÉMENT DE RANGEMENT LATÉRAL FILAIRE XL POUR BOÎTE À GANTS (COMP. V1, V2 & M3)

AC-BOGANXL



PORTE-CONTENANT

PORTE N NOIRE VOLCANIQUE (COMP. V2)

AC-PORTEN



PORTE-CONTENANT

PORTE SAC POUBELLE 2 x 13L DOUBLE FILAIRE (COMP. V2 & M3)

AC-M21066SI



PORTE-CONTENANT

ÉLÉMENT DE RANGEMENT LATÉRAL FILAIRE POUR BOÎTE À GANTS (COMP. V1, V2 & M3)

AC-BOGAN



PORTE-CONTENANT

POUBELLE 13L TRI SÉLECTIF (2X) (COMP. V1, V2 & M3)

AC-M77869



PORTE-CONTENANT

ÉLÉMENT DE RANGEMENT LATÉRAL FILAIRE 1 ÉTAGE (BAC 155 1/4 INCLUS) (COMP. V1, V2 & M3)

AC-M21020SC155



PORTE-CONTENANT

ÉLÉMENT DE RANGEMENT LATÉRAL FILAIRE 1 ÉTAGE (BAC 075 1/4 INCLUS) (COMP. V1, V2 & M3)

AC-M21020SC75



PORTE-CONTENANT

PORTE FLACONS ARRIÈRE FILAIRE (SANS BAC) MODALLI LOGISTALLI (COMP. V2 & M3)

AC-M21037SC



PORTE-CONTENANT

PORTE FLACONS FILAIRE AVANT (SANS BAC) MODALLI LOGISTALLI (COMP. V2 & M3)

AC-M21037SCAV



PORTE-CONTENANT

ÉLÉMENT DE RANGEMENT LATÉRAL FILAIRE 1 ÉTAGE (SANS BAC) (COMP. V1, V2 & M3)

AC-M21020SC



PORTE-CONTENANT

SUPPORT POUR SOLUTION HYDRO-ALCOOLIQUE - POUR CHARIOT 9G

AC-GEL16



PORTE-CONTENANT

PORTE SAC POUBELLE FILAIRE (COMP. V2 & M3)

AC-M21063SI



PORTE-CONTENANT

SUPPORT BOUTEILLE À OXYGÈNE (COMP. V2 & M3)

AC-M21038SI



PORTE-CONTENANT

POUBELLE 13L NOIRE VOLCANIQUE (COMP. V1, V2 & M3)

AC-M21028SC



Accessoires

PORTE-CONTENANT

**SANGLE EN ÉLASTOMÈRE
TRANSLUCIDE (COMP. V2 &
M3)**

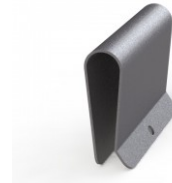
AC-M21027SA



PORTE-CONTENANT

**PINCE DE FIXATION POUR
POUBELLE 13L**

AC-PINCEPOUBELLE



PORTE-CONTENANT

**SUPPORT MONITORING
NOIR VOLCANIQUE (COMP.
M3)**

AC-M21093SC-M3



PORTE-CONTENANT

**PLANCHE DE MASSAGE
CARDIAQUE - ADULTE -
COMPATIBLE M3**

AC-M21049SZ-M3



PORTE-CONTENANT

**SUPPORT POUR BOÎTE À
AIGUILLES NOIR
VOLCANIQUE (COMP. M3)**

AC-M21027NV-M3



PORTE-CONTENANT

**PLANCHE À MASSAGE
CARDIAQUE POUR
NOURISSON SÉPARÉE
(COMP. M3)**

AC-M77871-M3



EXTENSION PLAN DE TRAVAIL ...

**TABLETTE ÉCRITOIRE
RABBATABLE**

AC-TAB-ECRITOIRE



ÉQUIPEMENT

LIAISONS RAIL (2 PIÈCES)

AC-JONRAIL



ÉQUIPEMENT

**ATTELAGE POUR
CHARIOTS (LOT DE 2)**

AC-M21088MA



ÉQUIPEMENT

**BANDE ADHÉSIVE ALU
AIMANTÉE POUR RAIL
(COMP. V1 & V2)**

AC-M77942



ÉQUIPEMENT

**BANDE VELCRO BLEUE
LONGUEUR 5 M À COUPER**

CO-M77885



PORTE-CONTENANT

**RANGÉE DE 3 BOÎTES
BASCULANTES GRISE AVEC
PIÈCE DE FIXATION POUR
RAIL**

AC-BB3



PORTE-CONTENANT

**RANGÉE DE 4 BOÎTES
BASCULANTES GRISE AVEC
PIÈCE DE FIXATION POUR
RAIL**

AC-M77881



PORTE-CONTENANT

**RANGÉE DE 6 BOÎTES
BASCULANTES GRISE AVEC
PIÈCE DE FIXATION POUR
RAIL**

AC-M77883



PORTE-CONTENANT

**RANGÉE DE 5 BOÎTES
BASCULANTES GRISE AVEC
PIÈCE DE FIXATION POUR
RAIL**

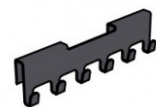
AC-M77882



PORTE-CONTENANT

**ENSEMBLE 6 CROCHETS
COMPATIBLE PORTIQUE ET
RAIL EASYCLIP**

AC-SUP5C



PORTIQUE

**PORTIQUE SUPPORT
INFORMATIQUE**

AC-M21031INF



PORTIQUE

**RAIL RÉGLABLE EN
HAUTEUR POUR PORTIQUE**

AC-RAIL-POR-REG



PORTIQUE

ÉTAGÈRE POUR PORTIQUE

AC-ETAGERE-PORT



PORTIQUE

PORTIQUE 2 RAILS

AC-PORT-2-RAILS



PORTIQUE

PORTIQUE 2 ETAGERES

AC-PORT-2-ETAG



Accessoires

PORTIQUE

**PORTIQUE 1 RAIL ET 1
ETAGERE**

AC-PORT-RAIL-ETAG



PORTIQUE

**RAIL REGLABLE EN
HAUTEUR POUR PORTIQUE**

AC-RAIL-REG




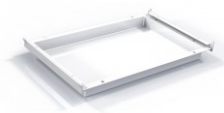














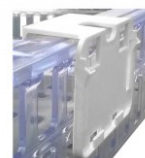
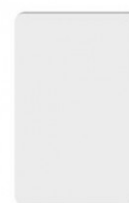

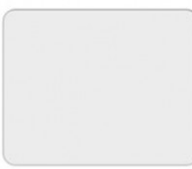

PORTIQUE

**PORTIQUE AVEC 2 RAILS
REGLABLES EN HAUTEUR**




















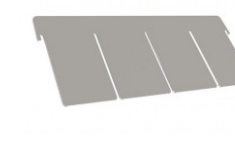

AC-PORT-2-RAILSREG








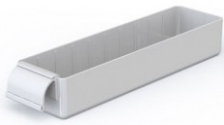












Composants

| | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>BAC À LÈVRES</p> <p>BAC À LÈVRES TRANSPARENT - HAUTEUR 200 MM AJOURÉ</p> <p>CO-BAL200AT</p>  | <p>BAC À LÈVRES</p> <p>BAC À LÈVRES TRANSPARENT - HAUTEUR 50 MM PLEIN</p> <p>CO-BAL50PT</p>  | <p>BAC À LÈVRES</p> <p>BAC À LÈVRES TRANSPARENT - HAUTEUR 100 MM PLEIN</p> <p>CO-BAL100PT</p>  | <p>BAC À LÈVRES</p> <p>BAC À LÈVRES TRANSPARENT - HAUTEUR 100 MM AJOURÉ</p> <p>CO-BAL100AT</p>  | <p>BAC À LÈVRES</p> <p>BUTÉE D'ARRÊT POUR BAL BLANC</p> <p>CO-BA</p>  | <p>PEIGNES POUR BAC A LEVRES ...</p> <p>PEIGNE TRANSPARENT BAL - HAUTEUR 200 MM LONG AJOURÉ</p> <p>CO-PL200AT</p>  | <p>PEIGNES POUR BAC A LEVRES ...</p> <p>PEIGNE TRANSPARENT BAL - HAUTEUR 200 MM COURT AJOURÉ</p> <p>CO-PC200AT</p>  |
| <p>PEIGNES POUR BAC A LEVRES ...</p> <p>PEIGNE TRANSPARENT BAL - HAUTEUR 100 MM LONG AJOURÉ</p> <p>CO-PL100AT</p>  | <p>PEIGNES POUR BAC A LEVRES ...</p> <p>PEIGNE TRANSPARENT BAL - HAUTEUR 100 MM LONG PLEIN</p> <p>CO-PL100PT</p>  | <p>PEIGNES POUR BAC A LEVRES ...</p> <p>PEIGNE TRANSPARENT BAL - HAUTEUR 100 MM COURT AJOURÉ</p> <p>CO-PC100AT</p>  | <p>PEIGNES POUR BAC A LEVRES ...</p> <p>PEIGNE TRANSPARENT BAL - HAUTEUR 100 MM COURT PLEIN</p> <p>CO-PC100PT</p>  | <p>PEIGNES POUR BAC A LEVRES ...</p> <p>PEIGNE TRANSPARENT BAL - HAUTEUR 050 MM COURT PLEIN</p> <p>CO-PC50PT</p>  | <p>PEIGNES POUR BAC A LEVRES ...</p> <p>PEIGNE TRANSPARENT BAL - HAUTEUR 050 MM LONG PLEIN</p> <p>CO-PL50PT</p>  | <p>PEIGNES POUR BAC A LEVRES ...</p> <p>CLIPS POUR PEIGNE BAL EN T BLANC</p> <p>CO-CTP</p>  |
| <p>PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...</p> <p>PORTE-ÉTIQUETTE BAL TRANSPARENT (LOT DE 50)</p> <p>CO-M24534VB</p>  | <p>PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...</p> <p>PORTE-ÉTIQUETTE BAL BLANC (LOT DE 10) VERTICAL</p> <p>CO-M77816VB</p>  | <p>PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...</p> <p>PORTE ÉTIQUETTE CAVALIER POUR BAL (VENDU PAR LOT DE 10)</p> <p>CO-M77817</p>  | <p>PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...</p> <p>SUPPORT ÉTIQUETTE BLANC VERTICAL (LOT DE 50)</p> <p>CO-M77937V</p>  | <p>PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...</p> <p>SUPPORT ÉTIQUETTE BLEU VERTICAL (LOT DE 50)</p> <p>CO-M77938V</p>  | <p>PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...</p> <p>SUPPORT ÉTIQUETTE BLANC HORIZONTAL (LOT DE 50)</p> <p>CO-M77937</p>  | <p>PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...</p> <p>SUPPORT ÉTIQUETTE BLEU HORIZONTAL (LOT DE 50)</p> <p>CO-M77938</p>  |

Composants

| | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>TIROIR</p> <p>ÉQUIPEMENT DE TIROIR POUR DOSSIERS SUSPENDUS BLANC</p> <p>CO-M21022MC</p>  | <p>TIROIR</p> <p>TIROIR BLANC HAUTEUR 235 MM</p> <p>CO-M24504MC</p>  | <p>TIROIR</p> <p>TIROIR BLANC HAUTEUR 155 MM</p> <p>CO-M24503MC</p>  | <p>TIROIR</p> <p>TIROIR BLANC HAUTEUR 075 MM</p> <p>CO-M24502MC</p>  | <p>TIROIR À TOXIQUE</p> <p>TIROIR À TOXIQUES BLANC AVEC PORTE ET SERRURE MÉCANIQUE HAUTEUR 155</p> <p>CO-M21046MC</p>  | <p>TIROIR À TOXIQUE</p> <p>TIROIR À TOXIQUES BLANC AVEC PORTE ET SERRURE MÉCANIQUE HAUTEUR 235</p> <p>CO-M21047MC</p>  | <p>TIROIR À TOXIQUE</p> <p>TIROIR À TOXIQUES BLANC AVEC PORTE ET SERRURE MÉCANIQUE HAUTEUR 075</p> <p>CO-M21045MC</p>  |
| <p>TIROIR PERCÉ</p> <p>TIROIR PERCÉ : COUVERCLES DU TIROIR À TOXIQUES BLANC AVEC CHARNIÈRE ET PATTES ARRIÈRES (NÉCESSI ...</p> <p>CO-M77873</p>  | <p>TIROIR PERCÉ</p> <p>TIROIR PERCÉ BLANC HAUTEUR 235</p> <p>CO-M77879</p>  | <p>TIROIR PERCÉ</p> <p>TIROIR PERCÉ BLANC HAUTEUR 155</p> <p>CO-M77878</p>  | <p>TIROIR PERCÉ</p> <p>TIROIR PERCÉ : COUVERCLES DU TIROIR À TOXIQUES BLANC SANS CHARNIÈRE AVEC PATTES ARRIÈRES (NÉCES ...</p> <p>CO-M77874</p>  | <p>TIROIR PERCÉ</p> <p>TIROIR PERCÉ BLANC HAUTEUR 075</p> <p>CO-M77877</p>  | <p>TIROIR PERCÉ</p> <p>TIROIR PERCÉ : COUVERCLES DU TIROIR À TOXIQUES BLANC SANS CHARNIÈRE - SANS PATTES ARRIÈRES</p> <p>CO-M77875</p>  | <p>PEIGNES POUR TIROIR</p> <p>PEIGNE TIROIR BLANC - HAUTEUR 235 LONG</p> <p>CO-M46027F6</p>  |
| <p>PEIGNES POUR TIROIR</p> <p>PEIGNE TIROIR BLANC - HAUTEUR 235 COURT</p> <p>CO-M46028F6</p>  | <p>PEIGNES POUR TIROIR</p> <p>PEIGNE TIROIR BLANC - HAUTEUR 075 LONG</p> <p>CO-M46034F6</p>  | <p>PEIGNES POUR TIROIR</p> <p>PEIGNE TIROIR BLANC - HAUTEUR 075 COURT SPECIAL PETER'S</p> <p>CO-PCP0570</p>  | <p>PEIGNES POUR TIROIR</p> <p>PEIGNE TIROIR BLANC - HAUTEUR 155 LONG</p> <p>CO-M46029F6</p>  | <p>PEIGNES POUR TIROIR</p> <p>PEIGNE TIROIR BLANC - HAUTEUR 075 COURT</p> <p>CO-M46035F6</p>  | <p>PEIGNES POUR TIROIR</p> <p>PEIGNE TIROIR BLANC - HAUTEUR 155 COURT</p> <p>CO-M46030F6</p>  | <p>BAC-TIROIR</p> <p>BAC TIROIR BLANC - 075 1/2</p> <p>CO-M77888</p>  |

| | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>BAC-TIROIR</p> <p>BAC TIROIR BLANC - 155 1/4</p> <p>CO-M24508MC</p>  | <p>BAC-TIROIR</p> <p>BAC TIROIR BLANC - 155 1/2</p> <p>CO-M77889</p>  | <p>BAC-TIROIR</p> <p>BAC TIROIR BLANC - 075 1/6</p> <p>CO-M24506MC</p>  | <p>BAC-TIROIR</p> <p>BAC TIROIR BLANC - 075 1/4</p> <p>CO-M24507MC</p>  | <p>BAC DE SÉPARATION</p> <p>BAC DE SÉPARATION BLANC - HAUTEUR 120 1/6 AVEC POIGNÉE LISSE</p> <p>CO-M24523MPL</p>  | <p>BAC DE SÉPARATION</p> <p>BAC DE SÉPARATION BLANC - HAUTEUR 120 1/6 AVEC POIGNÉE ET 5 RAINURES</p> <p>CO-M24523MP</p>  | <p>BAC DE SÉPARATION</p> <p>BAC DE SÉPARATION BLANC HAUTEUR 155 1/2</p> <p>CO-M77887</p>  |
| <p>BAC DE SÉPARATION</p> <p>BAC DE SÉPARATION BLANC HAUTEUR 075 1/2</p> <p>CO-M77886</p>  | <p>BAC DE SÉPARATION</p> <p>BAC DE SÉPARATION BLANC HAUTEUR 155 1/4 L</p> <p>CO-M24522MC</p>  | <p>BAC DE SÉPARATION</p> <p>BAC DE SÉPARATION BLANC - HAUTEUR 075 1/6 AVEC POIGNÉE</p> <p>CO-M24509MP</p>  | <p>BAC DE SÉPARATION</p> <p>BAC DE SÉPARATION BLANC - HAUTEUR 075 1/4 AVEC POIGNÉE</p> <p>CO-M24510MP</p>  | <p>BAC DE SÉPARATION</p> <p>BAC DE SÉPARATION BLANC HAUTEUR 075 1/4</p> <p>CO-M24510MC</p>  | <p>BAC DE SÉPARATION</p> <p>BAC DE SÉPARATION BLANC HAUTEUR 075 1/4 L</p> <p>CO-M24512MC</p>  | <p>BAC DE SÉPARATION</p> <p>BAC DE SÉPARATION BLANC HAUTEUR 155 1/6</p> <p>CO-M24523MC</p>  |
| <p>BAC DE SÉPARATION</p> <p>BAC DE SÉPARATION BLANC HAUTEUR 155 1/4</p> <p>CO-M24511MC</p>  | <p>BAC DE SÉPARATION</p> <p>BAC DE SÉPARATION BLANC HAUTEUR 075 1/6</p> <p>CO-M24509MC</p>  | <p>SÉPARATEURS</p> <p>SÉPARATEUR MOBILE BLANC - HAUTEUR 075 1/6</p> <p>CO-M24513MC</p>  | <p>SÉPARATEURS</p> <p>SÉPARATEUR MOBILE BLANC - HAUTEUR 075 1/4</p> <p>CO-M24514MC</p>  | <p>SÉPARATEURS</p> <p>BARRE DE LIAISON POUR SÉPARATEUR MOBILE BLANC (BAC DE SÉPARATION)</p> <p>CO-M24526MC</p>  | <p>SÉPARATEURS</p> <p>SÉPARATEUR MOBILE BLANC - HAUTEUR 155 1/4</p> <p>CO-M24515MC</p>  | <p>SÉPARATEURS</p> <p>SÉPARATEUR MOBILE BLANC HAUTEUR 155 1/6</p> <p>CO-M24525MC</p>  |

Composants

SÉPARATEURS

**BARRE DE LIAISON POUR
SÉPARATEUR MOBILE
BLANC (BAC TIROIR)**

CO-M24530MC



SÉPARATEURS

**SÉPARATEUR MOBILE
BLANC HAUTEUR 120 1/6
POUR BAC 120/6 AVEC
POIGNÉE**

CO-M24525MS



BAC DE SUBDIVISION

**BOÎTE DE SUBDIVISION
BLANCHE - HAUTEUR 155
1/8**

CO-M24620MC



BAC DE SUBDIVISION

**BOÎTE DE SUBDIVISION
BLANCHE - HAUTEUR 075
1/18**

CO-M24615MC



BAC DE SUBDIVISION

**BOÎTE DE SUBDIVISION
BLANCHE - HAUTEUR 075
1/12**

CO-M24617MC



BAC DE SUBDIVISION

**BOÎTE DE SUBDIVISION
BLANCHE - HAUTEUR 075
1/8**

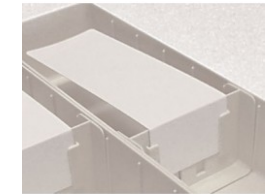
CO-M24618MC



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**PORTE-ÉTIQUETTE CACHE
BLANC LONGUEUR 160
(LOT DE 100)**


CO-M77915



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**PORTE-ÉTIQUETTE CACHE
BLANC LONGUEUR 160
(LOT DE 100)**

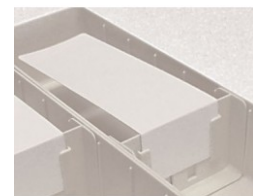
CO-M77915



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**PORTE-ÉTIQUETTE CACHE
BLANC - 2 CASES -
LONGUEUR 80 (LOT DE
100)**

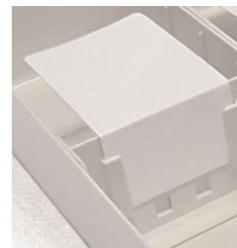
CO-M77906



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**PORTE-ÉTIQUETTE CACHE
BLANC - 2 CASES -
LONGUEUR 80 (LOT DE
100)**

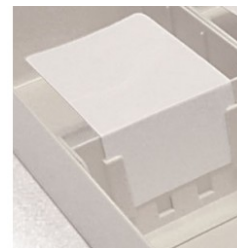CO-M77906



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**PORTE-ÉTIQUETTE CACHE
BLANC - 1 CASE -
LONGUEUR 40 (LOT DE
100)**

CO-M77905



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**PORTE-ÉTIQUETTE CACHE
BLANC - 1 CASE -
LONGUEUR 40 (LOT DE
100)**

CO-M77905



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**PORTE-ÉTIQUETTE BLANC
VERTICAL UNIVERSEL (LOT
DE 10)**

CO-M77816V



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**PORTE-ÉTIQUETTE BLANC
VERTICAL UNIVERSEL (LOT
DE 10)**

CO-M77816V



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**PORTE-ÉTIQUETTE BLANC
HORIZONTAL UNIVERSEL
(VENDU PAR LOT DE 10)**

CO-M77816



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**PORTE-ÉTIQUETTE BLANC
HORIZONTAL UNIVERSEL
(VENDU PAR LOT DE 10)**

CO-M77816



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**SUPPORT ÉTIQUETTE
TRANSPARENT VERTICAL
(LOT DE 50)**

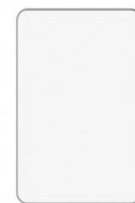
CO-M24534V



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**SUPPORT ÉTIQUETTE
TRANSPARENT VERTICAL
(LOT DE 50)**


CO-M24534V



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**SUPPORT ÉTIQUETTE
TRANSPARENT
HORIZONTAL (LOT DE 50)**

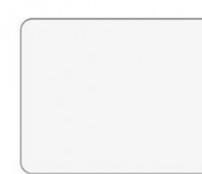
CO-M24534MZ



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**SUPPORT ÉTIQUETTE
TRANSPARENT
HORIZONTAL (LOT DE 50)**

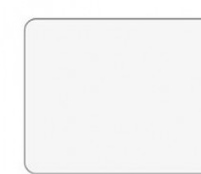CO-M24534MZ



















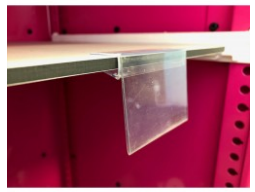



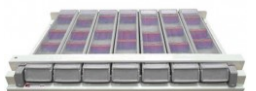
PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...







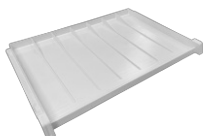














**SUPPORT ÉTIQUETTE
TRANSPARENT 1/6**

CO-M24610MZ



Composants

| | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...</p> <p>SUPPORT ÉTIQUETTE TRANSPARENT 1/6</p> <p>CO-M24610MZ</p>  | <p>PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...</p> <p>SUPPORT ÉTIQUETTE TRANSPARENT 1/4</p> <p>CO-M24611MZ</p>  | <p>PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...</p> <p>SUPPORT ÉTIQUETTE TRANSPARENT 1/4</p> <p>CO-M24611MZ</p>  | <p>PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...</p> <p>SUPPORT ÉTIQUETTE TRANSPARENT 1/2 (POUR TIROIR)</p> <p>CO-M77815</p>  | <p>PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...</p> <p>SUPPORT ÉTIQUETTE TRANSPARENT 1/2 (POUR TIROIR)</p> <p>CO-M77815</p>  | <p>PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...</p> <p>PORTE-ÉTIQUETTE BLANC 80 X 50 MM</p> <p>CO-M24535SZ</p>  | <p>PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...</p> <p>PORTE-ÉTIQUETTE BLANC 80 X 50 MM</p> <p>CO-M24535SZ</p>  |
| <p>ÉTIQUETTES POUR TIROIR</p> <p>ÉTIQUETTES BLEUES (LOT DE 5)</p> <p>CO-M77826</p>  | <p>ÉTIQUETTES POUR TIROIR</p> <p>ÉTIQUETTES JAUNES (LOT DE 5)</p> <p>CO-M77825</p>  | <p>ÉTIQUETTES POUR TIROIR</p> <p>ÉTIQUETTES ROUGES (VENDU PAR LOT DE 5)</p> <p>CO-M77827</p>  | <p>ÉTIQUETTES POUR TIROIR</p> <p>ÉTIQUETTES VERTES (LOT DE 5)</p> <p>CO-M77828</p>  | <p>ÉTIQUETTES POUR TIROIR</p> <p>ÉTIQUETTES BLANCHES POUR BOÎTE DE SUBDIVISION</p> <p>CO-M24532MC</p>  | <p>ÉTAGÈRES EN ABS</p> <p>ÉTAGÈRE BLANCHE F600 À CLASSEURS (14 INTERVALLES)</p> <p>CO-M77899</p>  | <p>ÉTAGÈRES EN ABS</p> <p>ÉTAGÈRE BLANCHE F600 À SOLUTÉS</p> <p>CO-M24505MS</p>  |
| <p>ÉTAGÈRES EN ABS</p> <p>ÉTAGÈRE BLANCHE F600 STANDARD</p> <p>CO-M24505MC</p>  | <p>ÉTAGÈRES EN COMPACT</p> <p>ÉTAGÈRE TRESPA F600</p> <p>CO-M77884</p>  | <p>PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...</p> <p>PORTE-ÉTIQUETTE POUR ÉTAGÈRE EN RÉSINE STRATIFIÉE</p> <p>CO-M77907</p>  | <p>ENSEMBLE PLATEAU PILULIER ...</p> <p>ENSEMBLE PLATEAU 7 BACS JOURNALIERS GRAND MODÈLE</p> <p>CO-MEC70002</p>  | <p>ENSEMBLE PLATEAU PILULIER ...</p> <p>ENSEMBLE PLATEAU 7 BACS JOURNALIERS MOYEN MODÈLE</p> <p>CO-MEC70001</p>  | <p>ENSEMBLE PLATEAU PILULIER ...</p> <p>PLATEAU BAC JOURNALIER BLANC</p> <p>CO-MEC70003</p>  | <p>ENSEMBLE PLATEAU PILULIER ...</p> <p>SYSTÈME OUVERTURE BLANC</p> <p>CO-SOJB</p>  |

| | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>BAC JOURNALIER</p> <p>SÉPARATEUR MOYEN MODÈLE (UNITAIRE)</p> <p>CO-MEC70008</p>  | <p>BAC JOURNALIER</p> <p>SÉPARATEUR GRAND MODÈLE (UNITAIRE)</p> <p>CO-MEC70009</p>  | <p>BAC JOURNALIER</p> <p>BAC JOURNALIER TRANSPARENT GRAND MODÈLE</p> <p>CO-MEC70012</p>  | <p>BAC JOURNALIER</p> <p>BAC JOURNALIER TRANSPARENT MOYEN MODÈLE</p> <p>CO-MEC70011</p>  | <p>BAC JOURNALIER</p> <p>PILULIER SEUL AVEC COUVERCLE POUR TIROIRS JOINTIFS</p> <p>CO-MED038</p>  | <p>ENSEMBLE 8 PILULIERS</p> <p>ENSEMBLE PLATEAU 8 PILULIERS - MAUVE</p> <p>CO-M77900MA</p>  | <p>ENSEMBLE 8 PILULIERS</p> <p>PLATEAU PLUMIER - MAUVE</p> <p>CO-M77904MA</p>  |
| <p>ENSEMBLE 8 PILULIERS</p> <p>PILULIER PLUMIER - MAUVE</p> <p>CO-M77902MA</p>  | <p>ENSEMBLE 8 PILULIERS</p> <p>SÉPARATEUR POUR PILULIER PLUMIER (VERT OU MAUVE)</p> <p>CO-M77903</p>  | <p>PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...</p> <p>PORTE-ÉTIQUETTES TRANSPARENT MOYEN MODÈLE (LOT DE 50)</p> <p>CO-MEC80020</p>  | <p>PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...</p> <p>PORTE-ÉTIQUETTES TRANSPARENT GRAND MODÈLE (LOT DE 50)</p> <p>CO-MEC80021</p>  | <p>ÉTIQUETTES POUR PILULIER</p> <p>LOT DE 35 PLANCHES DE 24 ÉTIQUETTES POUR PLATEAUX 8 PILULIERS (COLORIS PANACHÉS)</p> <p>CO-M77901</p>  | <p>ÉTIQUETTES POUR PILULIER</p> <p>ÉTIQUETTES AUTOCOLLANTES MOYEN MODÈLE (200 PLANCHES DE 27 SOIT 5400 ÉTIQUETTES)</p> <p>CO-MEZ80020</p>  | <p>ÉTIQUETTES POUR PILULIER</p> <p>ÉTIQUETTES AUTOCOLLANTES GRAND MODÈLE (200 PLANCHES DE 18 SOIT 3600 ÉTIQUETTES)</p> <p>CO-MEZ80021</p>  |
| <p>ÉTIQUETTES POUR PILULIER</p> <p>ÉTIQUETTES AUTOCOLLANTES MOYEN MODÈLE (50 PLANCHES DE 27 SOIT 1350 ÉTIQUETTES)</p> <p>CO-MEZ8002001</p>  | <p>ÉTIQUETTES POUR PILULIER</p> <p>ÉTIQUETTES AUTOCOLLANTES GRAND MODÈLE (50 PLANCHES DE 18 SOIT 900 ÉTIQUETTES)</p> <p>CO-MEZ8002101</p>  | <p>CASSETTE</p> <p>CASSETTE BLANCHE AVEC PORTE, VERROUILLAGE ET 2 POIGNÉES 3 NIVEAUX</p> <p>CO-M24627MC</p>  | <p>CASSETTE</p> <p>CASSETTE BLANCHE AVEC PORTE, VERROUILLAGE ET 2 POIGNÉES 2 NIVEAUX SPÉCIAUX</p> <p>CO-M24627MS</p>  | <p>CASSETTE</p> <p>CASSETTE BLANCHE AVEC PORTE ET VERROUILLAGE 3 NIVEAUX</p> <p>CO-M24626MC</p>  | <p>CASSETTE</p> <p>CASSETTE BLANCHE AVEC PORTE, VERROUILLAGE ET 2 POIGNÉES 2 NIVEAUX</p> <p>CO-M24624MC</p>  | <p>CASSETTE</p> <p>CASSETTE BLANCHE AVEC PORTE ET VERROUILLAGE 2 NIVEAUX</p> <p>CO-M24623MC</p>  |

Composants

CASSETTE

**CASSETTE BLANCHE AVEC
PORTE ET VERROUILLAGE 1
NIVEAU**

CO-M24623MS



CASSETTE

**CASSETTE BLANCHE SANS
PORTE 2 NIVEAUX**

CO-M24622MC



CASSETTE

**CASSETTE BLANCHE SANS
PORTE 3 NIVEAUX**

CO-M24625MC



CASSETTE

**CASSETTE BLANCHE AVEC
PORTE, VERROUILLAGE ET
2 POIGNÉES 1 NIVEAU**

CO-M24624MS



PORTE-ETIQUETTES / SUPPORT É...

**POCHETTE
AUTOCOLLANTE
TRANSPARENTE A4 (LOT
DE 5)**

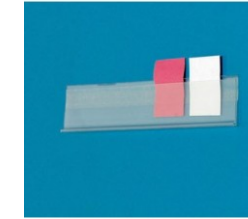
CO-M77859




PORTE-ETIQUETTES / SUPPORT É...

**SUPPORT AUTOCOLLANT
POUR SUPPORT-
ÉTIQUETTE TRANSPARENT
(LOT DE 5)**

CO-M77880



Décors

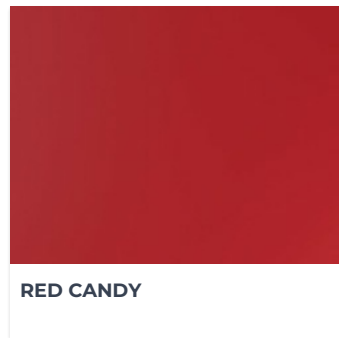


Une maintenance préventive qui s'adapte à vous

La maintenance des dispositifs médicaux n'est pas seulement une **obligation technique**, mais aussi une **responsabilité légale** et réglementaire de l'établissement.

Elle repose sur :

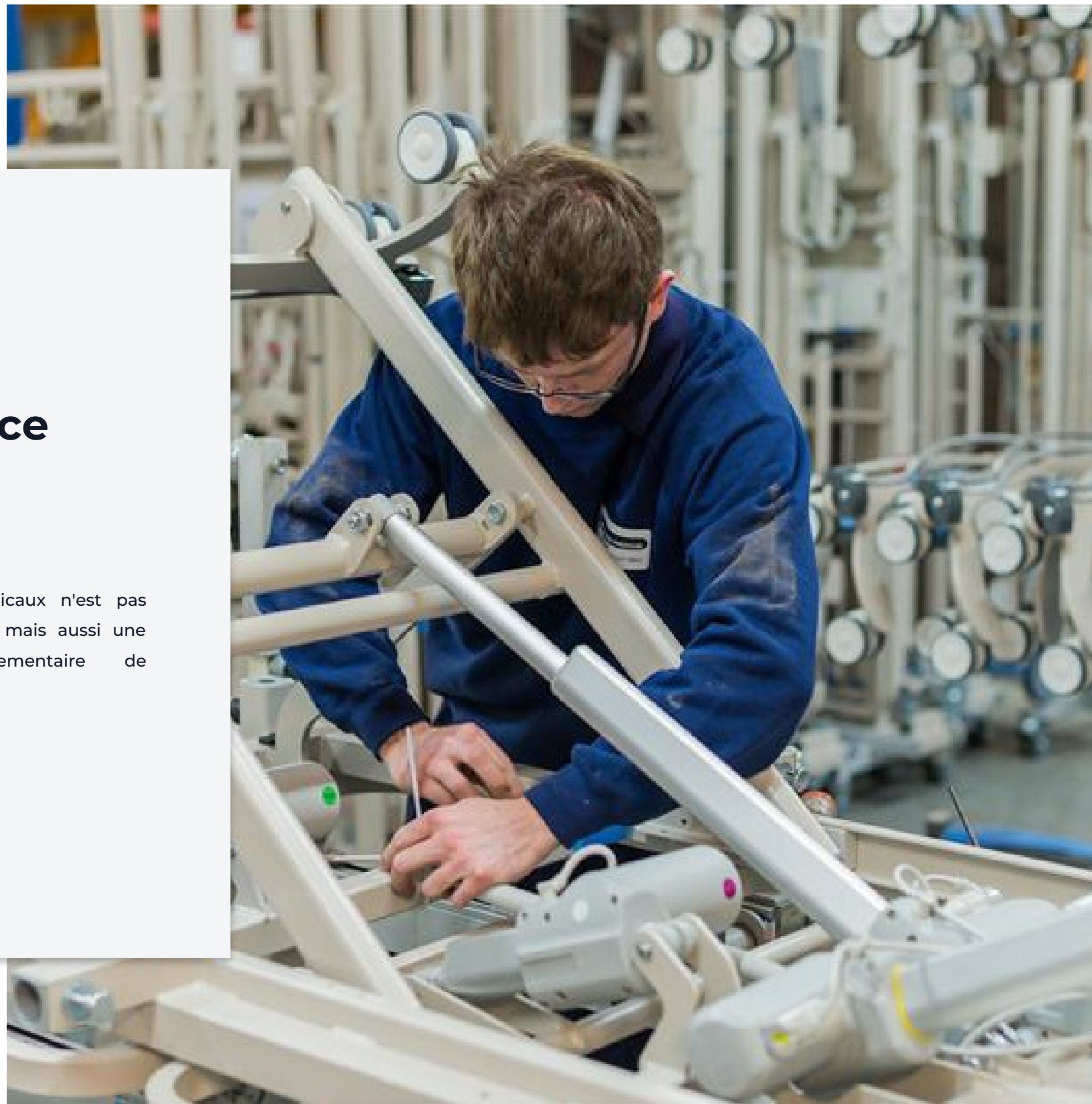- Une politique claire
- Des procédures de traçabilité
- L'utilisation de pièces conformes
- Et la qualification du personnel



Les avantages de la maintenance préventive



LES AVANTAGES D'UNE MAINTENANCE RÉGULIÈRE DE VOS ÉQUIPEMENTS

- Plus de performance : disponibilité maximale du parc.
- Plus de qualité : un service fiable et continu.
- Moins de dépenses : réduction des coûts de réparation.
- Moins de pannes : continuité assurées.



ALLONGER LA DURÉE DE VIE DE VOS ÉQUIPEMENTS & GARANTIR LA SÉCURITÉ

Nos programmes de maintenance sont pensés pour :

- Exploiter pleinement les performances de vos équipements.
- Assurer des contrôles réguliers et des diagnostics fiables.
- Préserver la sécurité des patients, résidents et soignants.
- Maintenir la conformité réglementaire de votre établissement.



UN BUDGET SOUS CONTRÔLE

Nos solutions de maintenance vous aident à :

- Anticiper vos dépenses.
- Éviter les coûts imprévus.
- Optimiser vos investissements en toute transparence.



DES PIÈCES CERTIFIÉES POUR UNE FAISABILITÉ DURABLE

Toutes nos interventions sont réalisées avec des pièces d'origine, testées et validées garantissant :

- La sécurité maximale lors de l'utilisation de vos équipements.
- Le respect strict des normes réglementaires.
- La longévité et la fiabilité de vos lits, matelas et accessoires.

Nos prestations de maintenance préventive



UN INTERLOCUTEUR UNIQUE POUR UNE SOLUTION COMPLÈTE

De l'avant-vente à l'après-vente, nous vous accompagnons à chaque étape.

Grâce à une **analyse précise** de vos besoins, nous mettons en place un **support technique** sur-mesure, fondé sur une **collaboration durable** et **efficace**.

DES EXPERTS À VOS CÔTÉS

Nos techniciens et ingénieurs, régulièrement formés aux dernières innovations, vous assurent :

- Un service réactif et de haute qualité.
- Une installation professionnelle de vos équipements.
- La formation complète de vos équipes, directement sur site.

NOS TECHNICIENS RÉALISENT UNE VÉRIFICATION COMPLÈTE

- Contrôle mécanique : assemblage, articulations, freins, verrouillages.
- Contrôle électronique : composants, commandes, capteurs.
- Points de sécurité : barrières, systèmes de blocage, dispositifs de protection.
- Lubrification : regraissage de tous les points de pivot.
- Tests électriques : réalisés conformément aux normes en vigueur.

Chaque opération (contrôle, réglage, remplacement) est consignée dans le rapport de maintenance du technicien.

REMISE EN ÉTAT DU PARC

A l'issue de la visite, notre service de maintenance préventive vous enverra par mail le **rapport de maintenance** complété pour chaque équipement.

Les **fiches d'intervention** sont transmises à votre interlocuteur HAcare qui établit les devis nécessaires pour les réparations ou remplacements.

Vous disposez ainsi d'un **suivi complet** et **transparent** de la **maintenance** de votre parc.

Résultat : un processus clair et tracé, qui garantit la sécurité, la conformité et la disponibilité de vos équipements.



Z.I. Nord 14 rue des forges
86200 - Loudun

Tél +33 (0)1 42 84 01 15
adv.allibert@hacare.com



Stéphane HARDOIN
Responsable Ventes France
s.hardoin@hacare.com
07 44 73 69 53



Administration des ventes
adv.allibert@hacare.com
+33 (0)1 42 84 01 15



Julien FROMENT
Corse
contact@syneris-sante.com
06 99 85 93 21



Anthony GONZALES
Sud Est
a.gonzales@hacare.com
06 22 27 71 47



Stéphane HARDOIN
Grand-Est
s.hardoin@hacare.com
07 44 73 69 53



Stéphane HARDOIN
Nord - Paris - Normandie
s.hardoin@hacare.com
07 44 73 69 53



Antoine MARIOT
Sud Ouest
a.mariot@hacare.com
07 45 29 16 99



Béatrice PAZZINI
Aquitaine
sud.ouest.hospitalier@wanadoo.fr
05 56 34 81 93



Marine POINT
Nord Ouest
m.point@hacare.com
06 27 47 71 35



HAcare
MEDICAL

1860

