



CHARIOTS DE SOINS CHARIOT SÉCURISÉ À TIROIRS JOINTIFS - MM3 (MOD'ALLI)



Soins et équipements de service - Soins



Sommaire

HAcare Médical, spécialiste des dispositifs médicaux depuis 1860	3
Nos engagements	4
Choisir l'économie circulaire	5
Matériaux recyclables	6
Certifications	7
Chariots de soins Hôpital Soins	8
Nos exclusivités	
Soft Sound	10
Easy Clip	11
No key concept	12
EasyMov et la 5 ^e roue motorisée	13
Nos points forts	
Protéger et verrouiller (Tiroirs jointifs)	15
Plateau sécurisé pour une préparation fiable (Surface de travail)	16
Tablette extensible (Optimiser l'espace)	17
Faciliter le nettoyage (Easy CLEAN)	18
Les caractéristiques	
Mobilité	20
Sécurité	21
Configurable	22 - 23
Informatisation des structures	24
COMPOSANTS : Tiroirs	25 - 26
COMPOSANTS : Cassette	27
Spécificités techniques	28
Options, Accessoires, Composants & Nuancier	37
Une maintenance préventive qui s'adapte à vous	50
Les avantages de la maintenance préventive	51
Nos prestations de maintenance préventive	52





HAcare Médical, spécialiste des dispositifs médicaux depuis 1860

Chez HAcare, nous concevons, fabriquons et distribuons des dispositifs médicaux et des solutions de mobilier médical innovant et durable, pensées pour améliorer le quotidien des patients comme des professionnels de santé.



Les engagements éco-responsables du groupe HAcare

Le groupe HAcare s'engage pour une **orientation industrielle éco-responsable**

Dans sa stratégie de développement durable, le groupe HAcare a défini une liste de **6 engagements** qui guident ses **actions et décisions** depuis la création du groupe et pour les années à venir.

Des indicateurs ont été mis en place pour chaque engagement.

Nos 6 engagements



Une production Made in France



L'utilisation de ressources renouvelables



Intégration de l'économie circulaire dans tout nouveau développement produit



Des achats responsables (suivi qualité fournisseurs)



Des actions au quotidien pour le respect et la protection de l'environnement



Une lutte contre les TMS, et les nuisances sonores à travers nos produits

Choisir l'économie circulaire



Les produits finis HAcare sont recyclables au travers d'un circuit de récupération chez le client final, pour recyclage avec notre fournisseur partenaire. Le bois ne pouvant être recyclé à l'infini car ses fibres deviennent trop petites ou s'épuisent, les déchets de bois sont alors récupérés et transformés en énergie verte.



Les panneaux en fibre végétale utilisés dans la fabrication des produits du groupe HAcare sont 100% bois de réemploi. Chaque produit fini HAcare porte un indice révélant la part de fibre végétale contenue.



Le recyclage est la pratique consistant à récupérer les matériaux usagés du flux de déchets, puis à incorporer ces mêmes matériaux dans le processus de fabrication. Chaque produit fini HAcare porte un indice révélant la part de matière recyclée contenue.



Matériaux recyclables

Les produits finis HAcare sont recyclables à 95%. Par exemple, le lit médicalisé HAcare est entièrement recyclable sauf les roues et les moteurs. Chaque lit est démontable pour récupérer séparément chaque matériau : fibre végétale, métal, plastique.



Le bois de réemploi

Les panneaux en fibre végétale utilisés dans la fabrication des produits du groupe HAcare sont :

100% en bois de réemploi

Le réemploi est un des procédés respectueux de l'environnement. Il s'agit par exemple de restes d'entreprises de transformation du bois (par exemple, les restes de scieries, les chutes de production...). Mais aussi de sous-produits d'activités telles que la gestion forestière durable et l'entretien des talus.

100% bois certifié FSC

Recyclables avec un fournisseur partenaire qui, en exclusivité mondiale et depuis 2021, recycle les panneaux MDF et HDF. Pas de consommation d'eau, ni d'énergie verte **biomasse**.



Le métal

Toutes les composantes en métal sont **recyclables** et réutilisables, et ce, **à l'infini**. Une fois le métal trié, il est compressé, broyé, laminé et fondu. Il est ensuite remoulé sous forme de bobines, de barres ou de fils pour la réutilisation. Ce procédé peut se faire sans fin !

Le recyclage des métaux présente de **nombreux avantages**. Il préserve les ressources naturelles en réduisant les besoins en matériaux vierges, diminue la consommation d'énergie et les émissions de **gaz à effet de serre**.



Le plastique recyclé

Au sein des usines de recyclage, les déchets (re) deviennent une **matière secondaire** grâce à différents processus : broyage, micronisation, régénération des matières plastiques.

Le plastique recyclé sera alors revendu aux industriels de la **plasturgie** sous forme de **paillettes**, de poudre ou encore de **granulés**.



CHARIOTS DE SOINS HÔPITAL

Soins

Chariot sécurisé à tiroirs jointifs - MM3 (MOD'ALLI)





NOS EXCLUSIVITÉS

Au cours des 40 dernières années, le niveau moyen de bruit dans les hôpitaux a augmenté de 15 décibels (dB), atteignant des niveaux d'environ 70 dB, bien au-dessus de la limite recommandée par l'OMS qui est de 35 dB pour un environnement de soins. Les produits HAcare sont conçus pour lutter contre les nuisances sonores. L'objectif est de réduire de 20dB avec l'ajout d'amortisseurs sur toutes les structures roulantes et brancardables.



Lutter contre les nuisances sonores

Support anti-vibratoire, amortisseur haute performance : pour des déplacements fluides, silencieux et confortables, même en passage de seuil ou sortie d'ascenseur. Les nuisances sonores diminuent significativement.



Easy Clip

Dans un environnement de soins où chaque seconde compte et où l'espace est souvent limité, l'optimisation de la surface de soins devient un enjeu stratégique pour améliorer l'efficacité des équipes soignantes et la sécurité des patients.


Le concept EasyClip® a été conçu pour répondre à ces contraintes avec une approche à la fois ergonomique, intuitive et modulable.



Optimiser la surface de soins

La **fixation des accessoires** se fait en un geste, **sans aucun outil**, offrant un gain de temps immédiat.

Les **accessoires**, entièrement **modulables**, s'adaptent à chaque besoin et à chaque situation de soin, pour un **travail plus fluide** et **efficace** au quotidien.

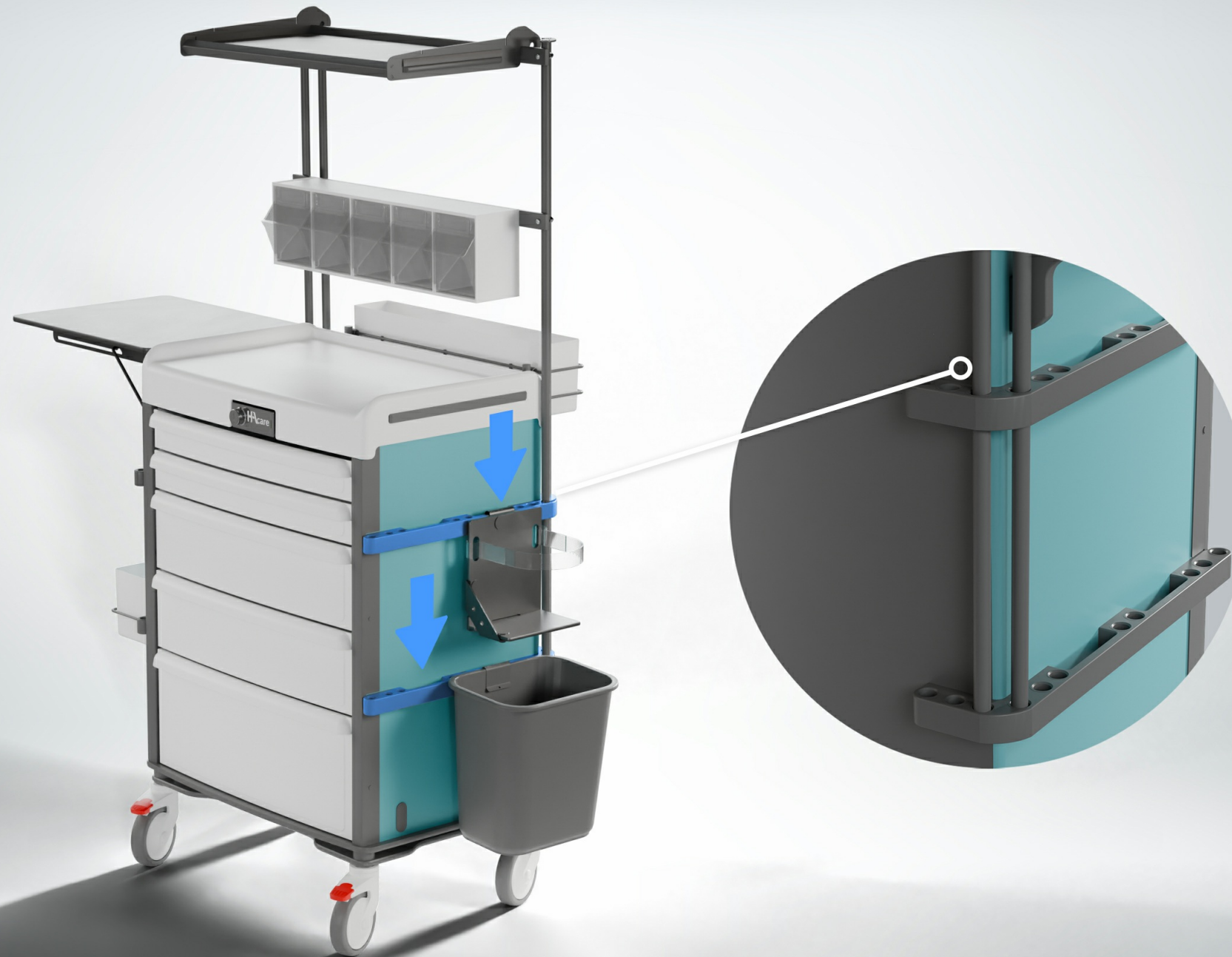

Le verrouillage des chariots de soins est essentiel pour garantir la sécurité des produits de santé et la traçabilité des actes. Qu'il soit à clé, électronique ou par scellé, il protège le contenu contre tout accès non autorisé et limite les risques d'erreur ou de vol. Adapté aux exigences hospitalières, ce système de sécurité assure un accès rapide et contrôlé aux soignants autorisés, renforçant la conformité, la confidentialité et la sérénité dans les services de soins.



Sécuriser le stockage

Serrures électroniques à **digicode**, **RFID** ou par **simple clé** pour une **sécurité adaptée** à chaque usage. Le **RFID** offre un **accès rapide et sécurisé**, limitant l'accès aux **personnels autorisés**. Traçabilité, fiabilité et praticité au quotidien.



Dans un environnement hospitalier en constante tension, la manipulation de charges lourdes et le déplacement de brancards représentent des défis quotidiens pour les équipes médicales. Entre la saturation des services et l'étroitesse des couloirs, les risques de Troubles Musculo-Squelettiques (TMS) pour le personnel et d'inconfort pour les patients sont accrus. C'est pour répondre à ces enjeux de santé au travail et de qualité de prise en charge qu'a été développée la solution de transport assisté.



Motorisation avec la 5^e roue

La **motorisation**, associée à une **5^e roue pivotante**, offre une grande **maniabilité**. Elle **facilite** les **déplacements** avec sa **batterie escamotable, sécurisée à clé**, ses **20 km d'autonomie**, et sa **gâchette avant / arrière** équipée d'un **électro-frein**.





NOS POINTS FORTS

Protéger et verrouiller (Tiroirs jointifs)



Les **tiroirs jointifs protègent** le contenu des tiroirs des **regards** indiscrets, de la **lumière** et des **UV**, préservant ainsi la **qualité** et la **confidentialité** des produits stockés.

Grâce au système de **verrouillage centralisé**, l'ouverture et la fermeture se font **en un seul geste**, simplifiant le travail du personnel tout en renforçant la **sécurité**.

Une solution pratique et fiable pour conjuguer protection, efficacité et sérénité au quotidien.



Le **plateau** du mobilier médical est conçu avec un **rebord sur trois côtés** pour garantir une **sécurité optimale** lors de la préparation des soins. Ce design **prévient les chutes d'instruments** ou **de produits**, même en cas de déplacement. Pratique et ergonomique, il permet au personnel soignant de travailler en toute confiance, avec un **espace de travail stable**, sécurisé et **facile à entretenir**. Une conception pensée pour allier sécurité, confort d'utilisation et efficacité au quotidien.

Tablette extensible (Optimiser l'espace)



La **tablette coulissante** offre une **extension** pratique de la **surface de travail**, idéale pour optimiser l'espace lors des soins. Associée à des accessoires périphériques, elle permet de **sécuriser** les **flacons** et le **matériel** tout en gardant le plateau principal dégagé. Le premier tiroir, dédié au clavier et à la souris, libère encore davantage l'espace de préparation. Un emplacement STPO complète l'ensemble pour une organisation ergonomique, fluide et parfaitement adaptée aux environnements médicaux exigeants.

Faciliter le nettoyage (Easy CLEAN)



Grâce à la solution **EasyClean®**, le **nettoyage** du mobilier médical devient **simple**, rapide et **efficace**. Le **plateau amovible** sans outil, donne un **accès total** aux surfaces à nettoyer, elles aussi amovibles.

Résultat : un **lavage intégral** en un minimum de temps, une **hygiène irréprochable**, et un vrai **gain de temps** pour le personnel soignant.



LES CARACTÉRISTIQUES



EasyMOV

Conçu pour allier confort d'utilisation et performance, notre mobilier médical offre une **maniabilité optimale** grâce à son système d'**amortisseur intégré**. Cette technologie **absorbe les vibrations** et irrégularités du sol, garantissant un **déplacement** fluide, **sécurisé** et **sans effort**, même en environnement hospitalier exigeant.

La **poignée d'aide à la poussée** facilite la **prise en main**.

Chaque mouvement est facilité, réduisant la fatigue et préservant la santé des utilisateurs au quotidien.


Pensé pour **limiter les troubles musculo-squelettiques (TMS)**, il permet aux soignants de travailler dans de meilleures conditions ergonomiques, tout en assurant la sécurité et la stabilité du matériel transporté.



Choix de roulettes

Le mobilier médical s'adapte à chaque environnement grâce au **choix de roulettes** de 75 mm ou 125 mm, permettant l'**optimisation** entre ajustement de la **hauteur de surface** de travail et le **confort de déplacement**.

Les **deux freins avant**, facilement accessibles au pied, assurent une **stabilité parfaite** lors des soins ou des préparations, renforçant la **sécurité** du mobilier et la confiance des soignants dans leurs gestes.

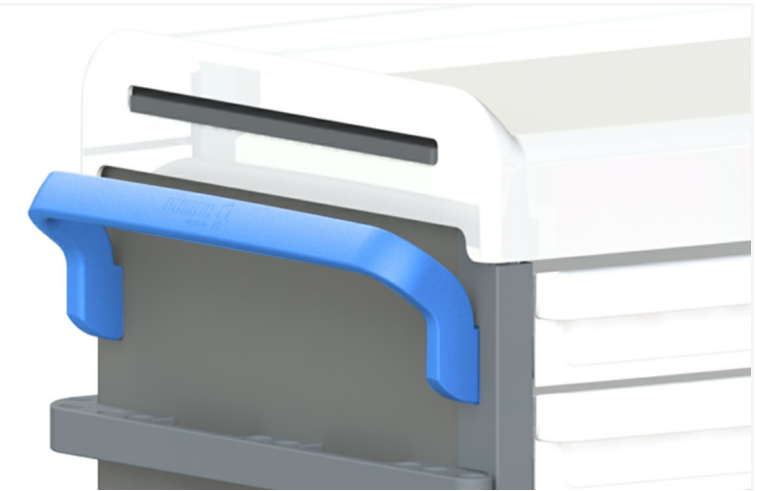

Poignées d'aide à la poussée

Conçu pour allier confort d'utilisation et performance, notre mobilier médical offre une **maniabilité optimale** et une **bonne prise en main** grâce à sa **poignée d'aide à la poussée**.

Son système d'amortisseur intégré facilite les déplacements.

Chaque **mouvement** est **fluide**, réduisant la fatigue et préservant la santé des utilisateurs au quotidien.

Pensé pour **limiter les troubles musculo-squelettiques (TMS)**, il permet aux soignants de travailler dans de meilleures conditions ergonomiques, tout en assurant la sécurité et la stabilité du matériel transporté.



Verrouillage par digicode

La **serrure à digicode** offre une **sécurité optimale** et une **gestion simplifiée des accès** au mobilier médical. Contrairement aux clés, Le code garantit un verrouillage fiable et rapide, limitant les risques de perte ou de duplication.

Elle permet un **contrôle précis de l'accès** aux médicaments et dispositifs médicaux, tout en améliorant la **traçabilité** et la **confidentialité**. Idéale pour les environnements hospitaliers exigeants, elle allie praticité, sécurité et conformité aux protocoles de soins.



Verrouillage RFID

Le **verrouillage RFID** assure une sécurité optimale et un **accès maîtrisé** au mobilier médical. Grâce à un **badge** ou une **carte nominative**, chaque ouverture est simple, rapide et **traçable**. Elle renforce la **confidentialité**, limite les accès non autorisés et s'adapte parfaitement aux environnements hospitaliers exigeants, où la fluidité et la fiabilité des gestes sont essentielles. Un système moderne, sûr et ergonomique, pour une **gestion simplifiée** et un **contrôle optimal** du matériel médical.



Verrouillage à clé

Le **verrouillage à clé** sur le mobilier médical garantit une **sécurité** fiable et accessible pour le stockage des médicaments et équipements sensibles. **Simple à utiliser**, il limite les accès non autorisés tout en offrant une **solution robuste** et **éprouvée**. Idéal pour les environnements hospitaliers exigeants, il assure la **protection du contenu**, renforce la **confidentialité** et contribue à la conformité aux **protocoles de sécurité**. Une solution pratique et efficace pour sécuriser le matériel au quotidien et faciliter le travail des équipes soignantes.




Optimiser l'espace

Le mobilier médical HACARE s'adapte à chaque usage grâce à un **large choix** de **composants modulables**. En version P80, il optimise le soin et offre une **grande capacité** de rangement. **Compatible** avec **tiroirs** et **bacs à lèvres normalisés**, permet une organisation claire et efficace. Idéal pour **combiner** tiroirs jointifs et étagères standards, il assure un **espace de travail pratique**, évolutif et performant au quotidien, répondant aux besoins des équipes soignantes.



Une modularité selon l'usage

Le mobilier médical propose une **grande modularité** pour un rangement optimisé : les **petits tiroirs** pour les petits DMS (seringues, aiguilles ..), les **tiroirs intermédiaires** pour les compresses et perfuseurs, et le **grand tiroir** pour les solutés massifs. La **tablette coulissante** plutôt dédiée aux actes administratifs augmente la surface de travail et libère l'espace dédié à la préparation. Un espace dédié aux **supports informatiques** optimise et facilite le suivi patient.

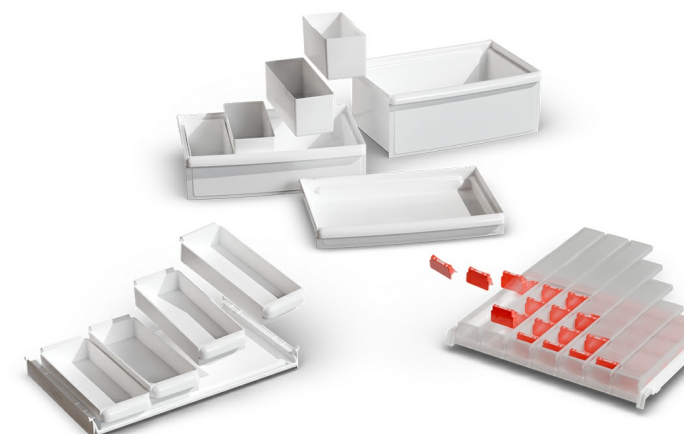

Choisir les composants pour un mobilier médical sur mesure

Configurez votre mobilier médical selon vos **besoins** grâce à un large choix de **composants modulaires**. Créez une **solution sur mesure**, parfaitement adaptée à vos usages quotidiens. Chaque élément est pensé pour **optimiser** votre organisation, votre **confort** de travail et l'**efficacité** des soins, tout en garantissant une ergonomie optimale. Une personnalisation complète pour un **mobilier évolutif, durable** et en parfaite adéquation avec les exigences de votre service.



Choisir les configurations "type"

Grâce à **notre expertise** en mobilier médical, nous concevons pour vous des **configurations "type"** pensées pour chaque usage. Sélection rigoureuse de **composants** et d'**accessoires**, agencement optimisé, ergonomie et confort d'utilisation : tout est étudié pour répondre aux besoins spécifiques de chaque service. **Notre équipe vous accompagne** pour définir la configuration la plus adaptée à vos pratiques, en alliant fonctionnalité, durabilité et efficacité au quotidien.



Choisir les couleurs du mobilier médical

Personnalisez votre environnement hospitalier en choisissant parmi une large **gamme de coloris**. Idéal pour **différencier** les **espaces par service** ou par usage et **faciliter l'orientation** du personnel soignant et des patients.



Confort et fiabilité pour le suivi patient connecté

Le **bras informatique** avec platine métal **verrouillable** est conçu pour offrir une utilisation fluide, stable et **sécurisée** lors du **suivi patient**. **Robuste** et ergonomique, il maintient l'équipement en **position idéale** tout en **protégeant le matériel** contre les manipulations non autorisées. Sa **platine verrouillable** assure une fixation **fiable** et un usage en toute **sécurité** dans les environnements de soins exigeants.



Caisson CTSP0

Le **caisson informatique sécurisé** HACARE se transforme en **tablette coulissante** intégrant clavier et souris, idéal pour **accueillir un PC portable**. Il permet un accès rapide et sécurisé aux outils numériques essentiels au suivi des soins. Pensé pour **intégrer** les dispositifs de **suivi patient** dans le quotidien des équipes soignantes, il combine sécurité, ergonomie et praticité, offrant un **espace de travail** optimisé, fluide et organisé, pour un soin plus **efficace** et une gestion **simplifiée** des informations médicales.



Portique informatique

Le **bras avec portique** pour ordinateur HACARE, jumelé à un **tiroir coulissant** équipé de clavier et souris, offre une solution complète pour le suivi des soins. Complété par un **emplacement CTSP0**, ce système permet une intégration ergonomique des **outils informatiques** directement au poste de travail. Il garantit un **accès rapide** et **sécurisé** aux **données patient**, optimise l'espace et fluidifie les gestes quotidiens des équipes soignantes, alliant confort, organisation et efficacité dans tous les environnements de soins.




Les **tiroirs jointifs protègent** le contenu des tiroirs **des regards** indiscrets, de la **lumière** et des **UV** , préservant ainsi la qualité et la **confidentialité** des produits stockés.

Grâce au système de **verrouillage centralisé** , l'ouverture et la fermeture se font en **un seul geste** , simplifiant le travail du personnel tout en renforçant la sécurité.


Les **tiroirs amovibles** peuvent être **nettoyés en autoclave** , les **angles rayonnés** facilitent le nettoyage.

Une solution pratique et fiable pour conjuguer protection, efficacité et sérénité au quotidien.

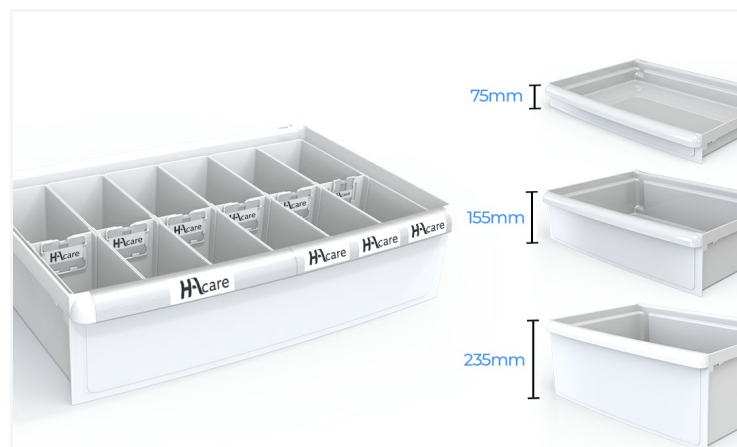

Les tiroirs ergonomiques


Le mobilier médical s'**adapte** à chaque organisation de soins grâce à ses **configurations personnalisables**. Choisissez parmi 3 hauteurs de tiroirs et **composez librement** l'aménagement intérieur selon vos besoins.

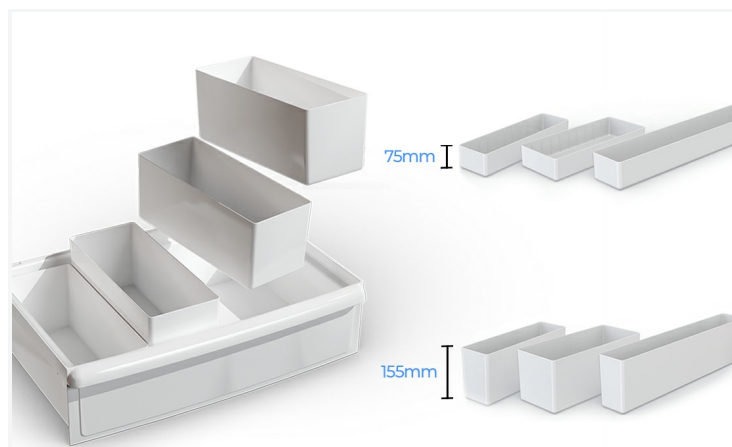

Les bacs de séparation


Le mobilier médical s'**adapte** à **chaque organisation** de soins grâce à ses **configurations personnalisables**. Choisissez parmi 3 hauteurs de tiroirs et composez librement l'**aménagement intérieur** selon vos besoins avec les **bacs de séparation**.

Une conception **flexible** et **évolutive** qui permet d'**optimiser l'espace**, d'améliorer l'ergonomie et de rendre chaque poste de soin plus fonctionnel au quotidien.

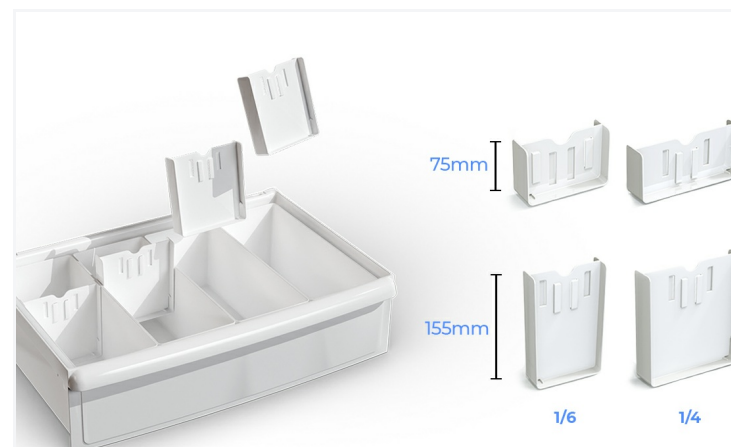

Les séparateurs

Composez librement l'**aménagement intérieur** selon vos besoins grâce aux bacs de séparations et aux **séparateurs, peignes de séparation**, boîtes de subdivision qui isolent chaque élément de soin pour une **plus grande sécurité**. Une **conception flexible** et **évolutive** qui permet d'**optimiser l'espace**, d'améliorer l'ergonomie et de rendre chaque poste de soin plus fonctionnel au quotidien.

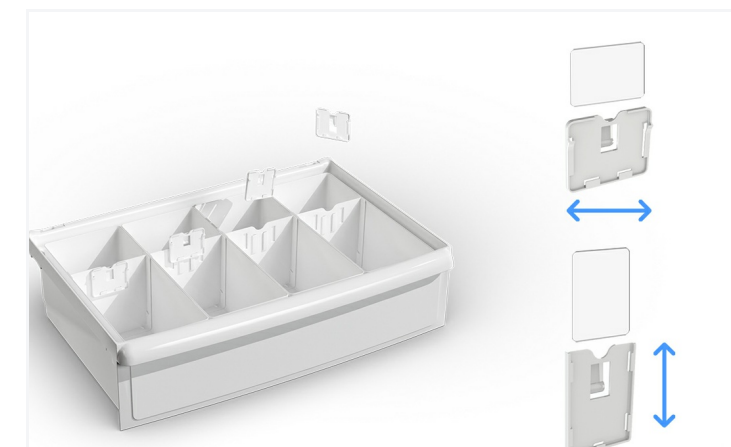

Les porte-étiquettes et étiquettes

Les porte-étiquettes sur les tiroirs du mobilier médical facilitent l'**identification rapide** et précise du contenu, **réduisant les erreurs** et optimisant l'**organisation des soins**. Ils permettent un **repérage clair** des médicaments, dispositifs médicaux ou fournitures, améliorant ainsi la **productivité** et la **fluidité du travail** des équipes. Adaptables et **modulables**, ils contribuent à un environnement de soins structuré et **sécurisé**, tout en **simplifiant** la **gestion quotidienne** du matériel et en renforçant l'efficacité et la sécurité des interventions.



COMPOSANTS : Casette

La cassette sécurisée offre un **espace de stockage** fixe et **inviolable**, idéal pour les produits sensibles. Son système de **verrouillage**, possible à n'importe quelle hauteur, garantit une protection renforcée et un **accès contrôlé** en toutes circonstances. Conçue pour accueillir des contenus dangereux ou toxiques, elle renforce la **sécurité** du personnel et des patients tout en assurant une organisation fiable et conforme aux exigences hospitalières.

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	27,6 kg
Poids Total Pack	46,1 kg
Pourcentage végétal (sur poids total)	60%
Pourcentage matière recyclée	25%

DIMENSIONS

Largeur	78,2 cm
Profondeur	49,8 cm
Hauteur plateau	101,2 cm
Façade	F600
Hauteur	104,2 cm
Epaisseur	Caisson : 1 / Dos : 0,6 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Structure Plateau	ABS PMMA thermoformé, ép. 4 mm, rebords de 30 mm sur 3 côtés
Caisson	Fibres végétales
Poignées	PA6 chargé fibres de verre
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Matériau	Rails Easyfix en PA6 chargé fibres de verre
Sommier / Glissière	ABS noir

PIÈTEMENT

Type de piètement	Roulettes pivotante simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Sans outils par volant
---------------------	------------------------

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	100 kg
----------------------------	--------

COLORIS

Caisson	Au choix dans sélection
---------	-------------------------

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	9G
Type de sommier	Mixte uniquement
Sommier Mixte : Tiroir hauteur 75 mm	9
Sommier Mixte : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	8
Sommier Mixte : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	9

CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Plastique ABS	M2
Fibres végétales	D-s2d0

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Niveau de bruit généré par le produit en fonction	42 db
---	-------

COMPOSITION

- 2 tiroirs 75
- 2 tiroirs 155
- 1 tiroir 235
- poubelle 13L tri sélectif
- support boîte à aiguilles



NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- Tiroirs jointifs
- Surface de travail
- Optimiser l'espace
- Easy CLEAN

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	27,6 kg
Poids Total Pack	46,6 kg
Pourcentage végétal (sur poids total)	60%
Pourcentage matière recyclée	25%

DIMENSIONS

Largeur	157,4 cm
Profondeur	50,1 cm
Hauteur plateau	101,2 cm
Façade	F600
Hauteur	104,2 cm
Epaisseur	Caisson : 1 / Dos : 0,6 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Structure Plateau	ABS PMMA thermoformé, ép. 4 mm, rebords de 30 mm sur 3 côtés
Caisson	Fibres végétales
Poignées	PA6 chargé fibres de verre
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Matière	Rails Easyfix en PA6 chargé fibres de verre
Sommier / Glissière	ABS noir

PIÈTEMENT

Type de piètement	Roulettes pivotante simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Sans outils par volant
---------------------	------------------------

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	100 kg
----------------------------	--------

COLORIS

Caisson	Au choix dans sélection
---------	-------------------------

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	9G
Type de sommier	Mixte uniquement
Sommier Mixte : Tiroir hauteur 75 mm	9
Sommier Mixte : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	8
Sommier Mixte : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	9

CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Plastique ABS	M2
Fibres végétales	D-s2d0

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Niveau de bruit généré par le produit en fonction	42 db
---	-------

COMPOSITION

- 2 tiroirs 75
- 2 tiroirs 155
- 1 tiroir 235
- poubelle 13L tri sélectif
- support boîte à aiguilles



NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- Tiroirs jointifs
- Surface de travail
- Optimiser l'espace
- Easy CLEAN

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	27,6 kg
Poids Total Pack	46,6 kg
Pourcentage végétal (sur poids total)	60%
Pourcentage matière recyclée	25%

DIMENSIONS

Largeur	78,2 cm
Profondeur	49,8 cm
Hauteur plateau	101,2 cm
Façade	F600
Hauteur	104,2 cm
Epaisseur	Caisson : 1 / Dos : 0,6 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Structure Plateau	ABS PMMA thermoformé, ép. 4 mm, rebords de 30 mm sur 3 côtés
Caisson	Fibres végétales
Poignées	PA6 chargé fibres de verre
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Matière	Rails Easyfix en PA6 chargé fibres de verre
Sommier / Glissière	ABS noir

PIÈTEMENT

Type de piètement	Roulettes pivotante simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Sans outils par volant
---------------------	------------------------

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	100 kg
----------------------------	--------

COLORIS

Caisson	Au choix dans sélection
---------	-------------------------

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	9G
Type de sommier	Mixte uniquement
Sommier Mixte : Tiroir hauteur 75 mm	9
Sommier Mixte : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	8
Sommier Mixte : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	9

CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Plastique ABS	M2
Fibres végétales	D-s2d0

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Niveau de bruit généré par le produit en fonction	42 db
---	-------

COMPOSITION

- 2 tiroirs 75
- 2 tiroirs 155
- 1 tiroir 235
- poubelle 13L tri sélectif
- support boîte à aiguilles



NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- Tiroirs jointifs
- Surface de travail
- Optimiser l'espace
- Easy CLEAN

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	27,6 kg
Poids Total Pack	51,7 kg
Pourcentage végétal (sur poids total)	60%
Pourcentage matière recyclée	25%

DIMENSIONS

Largeur	78,2 cm
Profondeur	49,8 cm
Hauteur plateau	101,2 cm
Façade	F600
Hauteur	104,2 cm
Epaisseur	Caisson : 1 / Dos : 0,6 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Structure Plateau	ABS PMMA thermoformé, ép. 4 mm, rebords de 30 mm sur 3 côtés
Caisson	Fibres végétales
Poignées	PA6 chargé fibres de verre
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Matière	Rails Easyfix en PA6 chargé fibres de verre
Sommier / Glissière	ABS noir

PIÈTEMENT

Type de piètement	Roulettes pivotante simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Sans outils par volant
---------------------	------------------------

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	100 kg
----------------------------	--------

COLORIS

Caisson	Au choix dans sélection
---------	-------------------------

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	9G
Type de sommier	Mixte uniquement
Sommier Mixte : Tiroir hauteur 75 mm	9
Sommier Mixte : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	8
Sommier Mixte : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	9

CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Plastique ABS	M2
Fibres végétales	D-s2d0

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Niveau de bruit généré par le produit en fonction	42 db
---	-------

COMPOSITION

- 1 tablette coulissante pour clavier informatique
- 3 tiroirs 75
- 3 tiroirs 155
- portique 2 rails - accessoire pour suspension d'écran avec platine
- poubelle 13L tri sélectif
- support boîte à aiguilles



TJ | 9G

NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- Tiroirs jointifs
- Surface de travail
- Optimiser l'espace
- Easy CLEAN

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	28,8 kg
Poids Total Pack	48,9 kg
Pourcentage végétal (sur poids total)	60%
Pourcentage matière recyclée	25%

DIMENSIONS

Largeur	78,2 cm
Profondeur	49,8 cm
Hauteur plateau	101,2 cm
Façade	F600
Hauteur	104,2 cm
Epaisseur	Caisson : 1 / Dos : 0,6 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Structure Plateau	ABS PMMA thermoformé, ép. 4 mm, rebords de 30 mm sur 3 côtés
Caisson	Fibres végétales
Poignées	PA6 chargé fibres de verre
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Matériau	Rails Easyfix en PA6 chargé fibres de verre
Sommier / Glissière	ABS noir

PIÈTEMENT

Type de piètement	Roulettes pivotante simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Sans outils par volant
---------------------	------------------------

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	100 kg
----------------------------	--------

COLORIS

Caisson	Au choix dans sélection
---------	-------------------------

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	9G
Type de sommier	Mixte uniquement
Sommier Mixte : Tiroir hauteur 75 mm	9
Sommier Mixte : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	8
Sommier Mixte : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	9

CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Plastique ABS	M2
Fibres végétales	D-s2d0

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Niveau de bruit généré par le produit en fonction	42 db
---	-------

COMPOSITION

•	2 tiroirs 75
•	4 tiroirs 155
•	poubelle 13L tri sélectif
•	support boîte à aiguille



NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- Tiroirs jointifs
- Surface de travail
- Optimiser l'espace
- Easy CLEAN

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	28,8 kg
Poids Total Pack	49,9 kg
Pourcentage végétal (sur poids total)	60%
Pourcentage matière recyclée	25%

DIMENSIONS

Largeur	78,2 cm
Profondeur	49,8 cm
Hauteur plateau	101,2 cm
Façade	F600
Hauteur	104,2 cm
Epaisseur	Caisson : 1 / Dos : 0,6 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Structure Plateau	ABS PMMA thermoformé, ép. 4 mm, rebords de 30 mm sur 3 côtés
Caisson	Fibres végétales
Poignées	PA6 chargé fibres de verre
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Matériau	Rails Easyfix en PA6 chargé fibres de verre
Sommier / Glissière	ABS noir

PIÈTEMENT

Type de piètement	Roulettes pivotante simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Sans outils par volant
---------------------	------------------------

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	100 kg
----------------------------	--------

COLORIS

Caisson	Au choix dans sélection
---------	-------------------------

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	9G
Type de sommier	Mixte uniquement
Sommier Mixte : Tiroir hauteur 75 mm	9
Sommier Mixte : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	8
Sommier Mixte : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	9

CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Plastique ABS	M2
Fibres végétales	D-s2d0

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Niveau de bruit généré par le produit en fonction	42 db
---	-------

COMPOSITION

- 2 tiroirs 75
- 4 tiroirs 155
- poubelle 13L tri sélectif
- support boîte à aiguilles



NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- Tiroirs jointifs
- Surface de travail
- Optimiser l'espace
- Easy CLEAN

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	28,8 kg
Poids Total Pack	53,4 kg
Pourcentage végétal (sur poids total)	60%
Pourcentage matière recyclée	25%

DIMENSIONS

Largeur	78,2 cm
Profondeur	49,8 cm
Hauteur plateau	109,6 cm
Façade	F600
Hauteur	112,2 cm
Epaisseur	Caisson : 1 / Dos : 0,6 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Structure Plateau	ABS PMMA thermoformé, ép. 4 mm, rebords de 30 mm sur 3 côtés
Caisson	Fibres végétales
Poignées	PA6 chargé fibres de verre
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Matière	Rails Easyfix en PA6 chargé fibres de verre
Sommier / Glissière	ABS noir

PIÈTEMENT

Type de piètement	Roulettes pivotante simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Sans outils par volant
---------------------	------------------------

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	100 kg
----------------------------	--------

COLORIS

Caisson	Au choix dans sélection
---------	-------------------------

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	10G
Type de sommier	Mixte uniquement
Sommier Mixte : Tiroir hauteur 75 mm	10
Sommier Mixte : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	9
Sommier Mixte : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	10

CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Plastique ABS	M2
Fibres végétales	D-s2d0

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Niveau de bruit généré par le produit en fonction	42 db
---	-------

COMPOSITION

•	1 tablette coulissante pour clavier informatique
•	3 tiroirs 75
•	2 tiroirs 155
•	1 tiroir 235
•	portique 2 rails - accessoire pour suspension d'écran avec platine
•	poubelle 13L tri sélectif
•	support boîte à aiguilles



10G

NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- Tiroirs jointifs
- Surface de travail
- Optimiser l'espace
- Easy CLEAN

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	27,6 kg
Pourcentage végétal (sur poids total)	60%
Pourcentage matière recyclée	25%

DIMENSIONS

Largeur	78,2 cm
Profondeur	49,8 cm
Hauteur plateau	101,2 cm
Façade	F600
Hauteur	104,2 cm
Epaisseur	Caisson : 1 / Dos : 0,6 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage individuel sur les roulettes avants
------------------	--

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Structure Plateau	ABS PMMA thermoformé, ép. 4 mm, rebords de 30 mm sur 3 côtés
Caisson	Fibres végétales
Poignées	PA6 chargé fibres de verre
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Matière	Rails Easyfix en PA6 chargé fibres de verre
Sommier / Glissière	ABS noir

PIÈTEMENT

Type de piétement	Roulettes pivotante simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Sans outils par volant
---------------------	------------------------

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	100 kg
----------------------------	--------

COLORIS

Caisson	Au choix dans sélection
---------	-------------------------

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	9G
Type de sommier	Mixte uniquement
Sommier Mixte : Tiroir hauteur 75 mm	9
Sommier Mixte : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	8
Sommier Mixte : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	9

CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Plastique ABS	M2
Fibres végétales	D-s2d0

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Niveau de bruit généré par le produit en fonction	42 db
---	-------



NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- Tiroirs jointifs
- Surface de travail
- Optimiser l'espace
- Easy CLEAN

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	28,8 kg
Pourcentage végétal (sur poids total)	60%
Pourcentage matière recyclée	25%

DIMENSIONS

Largeur	78,2 cm
Profondeur	49,8 cm
Hauteur plateau	109,6 cm
Façade	F600
Hauteur	112,2 cm
Epaisseur	Caisson : 1 / Dos : 0,6 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Structure Plateau	ABS PMMA thermoformé, ép. 4 mm, rebords de 30 mm sur 3 côtés
Caisson	Fibres végétales
Poignées	PA6 chargé fibres de verre
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Matière	Rails Easyfix en PA6 chargé fibres de verre
Sommier / Glissière	ABS noir

PIÈTEMENT

Type de piétement	Roulettes pivotante simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Sans outils par volant
---------------------	------------------------

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	100 kg
----------------------------	--------

COLORIS

Caisson	Au choix dans sélection
---------	-------------------------

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	10G
Type de sommier	Mixte uniquement
Sommier Mixte : Tiroir hauteur 75 mm	10
Sommier Mixte : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	9
Sommier Mixte : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	10

CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Plastique ABS	M2
Fibres végétales	D-s2d0

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Niveau de bruit généré par le produit en fonction	42 db
---	-------

10G



NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- Tiroirs jointifs
- Surface de travail
- Optimiser l'espace
- Easy CLEAN



OPTIONS, ACCESSOIRES, COMPOSANTS & NUANCIER

VERROUILLAGE SERRURES

VERROUILLAGE ELECTRONIQUE AVEC BADGE - POUR MODALLI

OP-M3RFID



VERROUILLAGE SERRURES

VERROUILLAGE ELECTRONIQUE AVEC CODE - POUR MODALLI

OP-M3CODE



VERROUILLAGE SERRURES

VERROUILLAGE MECANIQUE AVEC CLE - POUR MODALLI

OP-M3CLE



VERROUILLAGE SERRURES

CLE PASS POUR SERRURE MECANIQUE - GAMME M3

OP-M3CLEPASS



VERROUILLAGE OPTIONS

KIT 10 BADGES RFID UTILISATEURS

OP-KIT-BADGES-RFID



VERROUILLAGE OPTIONS

KIT BATTERIE DE SECOURS POUR VERROUILLAGE ELECTRONIQUE

OP-KIT-BATTERIE



VERROUILLAGE OPTIONS

KIT PASSE USB POUR VERROUILLAGE A CODE ET RFID M3 - SANS CODE DE SECURITE

OP-KIT-PASSE-USB-RFID



VERROUILLAGE OPTIONS

KIT ADMINISTRATION POUR VERROUILLAGE ELECTRONIQUE

OP-KIT-ADMIN



VERROUILLAGE OPTIONS

KIT PASSE USB POUR VERROUILLAGE A CODE ET RFID M3 - AVEC CODE DE SECURITE

OP-KIT-PASSE-USB-CODE



OPTIONS ROUES

ROUE BLANCHE DIAMÈTRE 125 MM SIMPLE GALET ANTISTATIQUE

OP-ROUE125AS



OPTIONS ROUES

ROUE BLANCHE DIAMÈTRE 100 MM DOUBLE GALET

OP-ROUE100



OPTIONS ROUES

ROUE BLANCHE DIAMÈTRE 75 MM DOUBLE GALET

OP-ROUE075



ROUE MOTORISÉE

OPTION ROUE MOTORISÉE POUR MOBILIER MODULAIRE M3

OP-M3EZGO



ROUE MOTORISÉE

OPTION DÉBRAYAGE POUR ROUE MOTORISÉE SUR MOBILIER MODULAIRE M3

OP-M3DEB



INFORMATISATION

CAISSON INFORMATIQUE (CTSPQ) QUARTZ (SERRURE NON INCLUSE) - POUR MODALLI

OP-M3CTSPQ



INFORMATISATION

TABLETTE COULISSANTE POUR CLAVIER INFORMATIQUE POUR MODALLI

OP-M3TABCLAVIER



EXTENSION PLAN DE TRAVAIL ...

TABLETTE COULISSANTE INTÉGRÉE AU PLATEAU - POUR MODALLI

OP-M3TABL



IDENTIFICATION

STICKER IDENTIFICATION PERSONNALISABLE - EN OPTION

OP-ID



Accessoires

PORTE-CONTENANT

**BRIDE AVEC CROCHET
(COMP. V1, V2 & M3)**

AC-M77892



PORTE-CONTENANT

**SUPPORT BAC À PLÂTRE
SUR EASYCLIP (BAC TIROIR
1/2 HAUTEUR 155 NON
INCLUS) (COMP. V2 & M3)**

AC-SUPBACPLAT



PORTE-CONTENANT

**BRIDE PORTE BLOUSE
(COMP. V1, V2 & M3)**

AC-M77929



PORTE-CONTENANT

**ÉLÉMENT DE RANGEMENT
LATÉRAL FILAIRE 2 ÉTAGES
(SANS BAC) (COMP. V1, V2
& M3)**

AC-M21021SC



PORTE-CONTENANT

**ÉLÉMENT DE RANGEMENT
LATÉRAL FILAIRE XL POUR
BOÎTE À GANTS (COMP. V1,
V2 & M3)**

AC-BOGANXL



PORTE-CONTENANT

**PORTE SAC POUBELLE 2 x
13L DOUBLE FILAIRE
(COMP. V2 & M3)**

AC-M21066SI



PORTE-CONTENANT

**DOSSIERS SUSPENDUS
CARTON POUR
CONTENEUR À DOSSIERS -
QUANTITE 25**

AC-1014236



PORTE-CONTENANT

**ÉLÉMENT DE RANGEMENT
LATÉRAL FILAIRE POUR
BOÎTE À GANTS (COMP. V1,
V2 & M3)**

AC-BOGAN



PORTE-CONTENANT

**POUBELLE 13L TRI
SÉLECTIF (2X) (COMP. V1,
V2 & M3)**

AC-M77869



PORTE-CONTENANT

**ÉLÉMENT DE RANGEMENT
LATÉRAL FILAIRE 1 ÉTAGE
(BAC 155 1/4 INCLUS)**

AC-M21020SC155



PORTE-CONTENANT

**ÉLÉMENT DE RANGEMENT
LATÉRAL FILAIRE 1 ÉTAGE
(BAC 075 1/4 INCLUS)**


AC-M21020SC75



PORTE-CONTENANT

**PORTE FLACONS ARRIÈRE
FILAIRE (SANS BAC)
MODALLI LOGISTALLI
(COMP. V2 & M3)**


AC-M21037SC

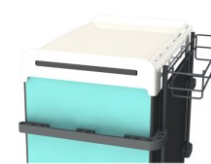

PORTE-CONTENANT

**PORTE FLACONS FILAIRE
AVANT (SANS BAC)
MODALLI LOGISTALLI
(COMP. V2 & M3)**


AC-M21037SCAV

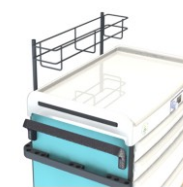

PORTE-CONTENANT

**ÉLÉMENT DE RANGEMENT
LATÉRAL FILAIRE 1 ÉTAGE
(SANS BAC) (COMP. V1, V2
& M3)**

AC-M21020SC

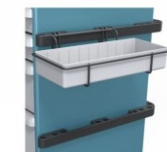

PORTE-CONTENANT

**SUPPORT POUR SOLUTION
HYDRO-ALCOOLIQUE -
POUR CHARIOT 9G**

AC-GEL16



PORTE-CONTENANT

**PORTE SAC POUBELLE
FILAIRE (COMP. V2 & M3)**

AC-M21063SI



PORTE-CONTENANT

**POUBELLE 13L NOIRE
VOLCANIQUE (COMP. V1,
V2 & M3)**

AC-M21028SC



PORTE-CONTENANT

**SANGLE EN ÉLASTOMÈRE
TRANSLUCIDE (COMP. V2 &
M3)**

AC-M21027SA



PORTE-CONTENANT

**PINCE DE FIXATION POUR
POUBELLE 13L**


AC-PINCEPOUBELLE



PORTE-CONTENANT

**CONTAINER DOSSIERS
SUSPENDUS NOIR AVEC
POIGNÉES**

AC-M1809011A-M3

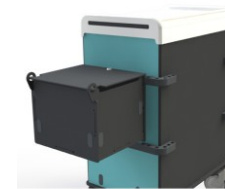

PORTE-CONTENANT

**SUPPORT POUR BOÎTE À
AIGUILLES NOIR
VOLCANIQUE (COMP. M3)**

AC-M21027NV-M3



EXTENSION PLAN DE TRAVAIL ...

**TABLETTE ÉCRITURE
RABBATABLE**

AC-TAB-ECRITOIRE



INFORMATISATION

**ACCESSOIRES POUR
SUSPENSION D'ÉCRAN SUR
PORTIQUE AVEC PLATINE
WESA 100/75 INCLINABLE
ET RÉGLABL ...**

AC-PLWER



INFORMATISATION

**ACCESSOIRES POUR
SUSPENSION D'ÉCRAN SUR
PORTIQUE AVEC PLATINE
WESA 100/75**

AC-PLWE



INFORMATISATION

**CÂBLE DE SÉCURISATION
NOIR VOLCANIQUE (COMP.
V1 & V2)**


AC-M77910



INFORMATISATION

**BLOC 6 PRISES BLANC
MONTÉ (COMP. V1,V2 & M3)**

AC-M21041MZ

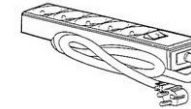

INFORMATISATION

**BRAS INFORMATIQUE
(COMP. V2) AVEC SUPPORT
TABLETTE**

AC-M77897SZ-TABLETTE



INFORMATISATION

**PLATINE FIBRES
VEGETALES POUR BRAS
INFORMATIQUE (COMP.
M3)**

AC-M77941R-M3



INFORMATISATION

**BRAS INFORMATIQUE
POUR CHARIOT "SANS
PORTIQUE"**

AC-M77897-PLAT-M3



ÉQUIPEMENT

LIAISONS RAIL (2 PIÈCES)

AC-JONRAIL



ÉQUIPEMENT

**ATTELAGE POUR
CHARIOTS (LOT DE 2)**

AC-M21088MA



ÉQUIPEMENT

**BANDE ADHÉSIVE ALU
AIMANTÉE POUR RAIL
(COMP. V1 & V2)**

AC-M77942



ÉQUIPEMENT

**BANDE VELCRO BLEUE
LONGUEUR 5 M À COUPER**

CO-M77885



PORTE-CONTENANT

**RANGÉE DE 3 BOÎTES
BASCULANTES GRISE AVEC
PIÈCE DE FIXATION POUR
RAIL**

AC-BB3



PORTE-CONTENANT

**RANGÉE DE 4 BOÎTES
BASCULANTES GRISE AVEC
PIÈCE DE FIXATION POUR
RAIL**

AC-M77881



PORTE-CONTENANT

**RANGÉE DE 6 BOÎTES
BASCULANTES GRISE AVEC
PIÈCE DE FIXATION POUR
RAIL**

AC-M77883



PORTE-CONTENANT

**RANGÉE DE 5 BOÎTES
BASCULANTES GRISE AVEC
PIÈCE DE FIXATION POUR
RAIL**

AC-M77882



PORTE-CONTENANT

**ENSEMBLE 6 CROCHETS
COMPATIBLE PORTIQUE ET
RAIL EASYCLIP**

AC-SUP5C



PORTIQUE

**RAIL RÉGLABLE EN
HAUTEUR POUR PORTIQUE**


AC-RAIL-POR-REG



PORTIQUE

ÉTAGÈRE POUR PORTIQUE

AC-ETAGERE-PORT

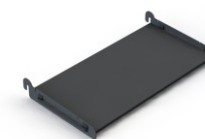

PORTIQUE

PORTIQUE 2 RAILS

AC-PORT-2-RAILS



PORTIQUE

PORTIQUE 2 ETAGERES

AC-PORT-2-ETAG



Accessoires

PORTIQUE

**PORTIQUE 1 RAIL ET 1
ETAGERE**

AC-PORT-RAIL-ETAG



PORTIQUE

**RAIL REGLABLE EN
HAUTEUR POUR PORTIQUE**

AC-RAIL-REG



PORTIQUE

**PORTIQUE AVEC 2 RAILS
REGLABLES EN HAUTEUR**

AC-PORT-2-RAILSREG



PORTIQUE

**PORTIQUE SUPPORT
INFORMATIQUE**

AC-M21031INF-M3



Composants

BAC À LÈVRES

**BAC À LÈVRES
TRANSPARENT - HAUTEUR
200 MM AJOURÉ**

CO-BAL200AT



BAC À LÈVRES

**BAC À LÈVRES
TRANSPARENT - HAUTEUR
50 MM PLEIN**

CO-BAL50PT



BAC À LÈVRES

**BAC À LÈVRES
TRANSPARENT - HAUTEUR
100 MM PLEIN**

CO-BAL100PT



BAC À LÈVRES

**BAC À LÈVRES
TRANSPARENT - HAUTEUR
100 MM AJOURÉ**

CO-BAL100AT



BAC À LÈVRES

**BUTÉE D'ARRÊT POUR BAL
BLANC**

CO-BA



PEIGNES POUR BAC A LEVRES ...

**PEIGNE TRANSPARENT
BAL - HAUTEUR 200 MM
LONG AJOURÉ**

CO-PL200AT



PEIGNES POUR BAC A LEVRES ...

**PEIGNE TRANSPARENT
BAL - HAUTEUR 200 MM
COURT AJOURÉ**

CO-PC200AT



PEIGNES POUR BAC A LEVRES ...

**PEIGNE TRANSPARENT
BAL - HAUTEUR 100 MM
LONG AJOURÉ**

CO-PL100AT



PEIGNES POUR BAC A LEVRES ...

**PEIGNE TRANSPARENT
BAL - HAUTEUR 100 MM
LONG PLEIN**

CO-PL100PT



PEIGNES POUR BAC A LEVRES ...

**PEIGNE TRANSPARENT
BAL - HAUTEUR 100 MM
COURT AJOURÉ**

CO-PC100AT



PEIGNES POUR BAC A LEVRES ...

**PEIGNE TRANSPARENT
BAL - HAUTEUR 100 MM
COURT PLEIN**

CO-PC100PT



PEIGNES POUR BAC A LEVRES ...

**PEIGNE TRANSPARENT
BAL - HAUTEUR 050 MM
COURT PLEIN**

CO-PC50PT



PEIGNES POUR BAC A LEVRES ...

**PEIGNE TRANSPARENT
BAL - HAUTEUR 050 MM
LONG PLEIN**

CO-PL50PT



PEIGNES POUR BAC A LEVRES ...

**CLIPS POUR PEIGNE BAL
EN T BLANC**

CO-CTP



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**PORTE-ÉTIQUETTE BAL
TRANSPARENT (LOT DE 50)**

CO-M24534VB



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**PORTE-ÉTIQUETTE BAL
BLANC (LOT DE 10)
VERTICAL**


CO-M77816VB



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**PORTE ÉTIQUETTE
CAVALIER POUR BAL
(VENDU PAR LOT DE 10)**

CO-M77817

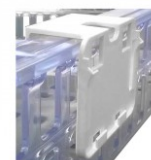

PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**SUPPORT ÉTIQUETTE
BLANC VERTICAL (LOT DE
50)**

CO-M77937V



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**SUPPORT ÉTIQUETTE BLEU
VERTICAL (LOT DE 50)**


CO-M77938V



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**SUPPORT ÉTIQUETTE
BLANC HORIZONTAL (LOT
DE 50)**


CO-M77937

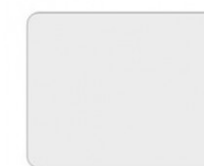







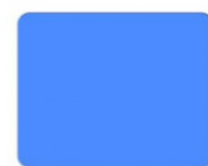
















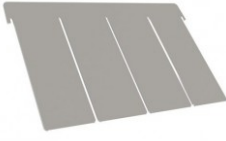




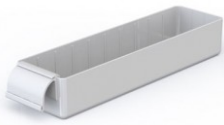









PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**SUPPORT ÉTIQUETTE BLEU
HORIZONTAL (LOT DE 50)**

CO-M77938



<p>TIROIR</p> <p>ÉQUIPEMENT DE TIROIR POUR DOSSIERS SUSPENDUS BLANC</p> <p>CO-M21022MC</p> 	<p>TIROIR</p> <p>TIROIR BLANC HAUTEUR 235 MM</p> <p>CO-M24504MC</p> 	<p>TIROIR</p> <p>TIROIR BLANC HAUTEUR 155 MM</p> <p>CO-M24503MC</p> 	<p>TIROIR</p> <p>TIROIR BLANC HAUTEUR 075 MM</p> <p>CO-M24502MC</p> 	<p>TIROIR À TOXIQUE</p> <p>TIROIR À TOXIQUES BLANC AVEC PORTE ET SERRURE MÉCANIQUE HAUTEUR 155</p> <p>CO-M21046MC</p> 	<p>TIROIR À TOXIQUE</p> <p>TIROIR À TOXIQUES BLANC AVEC PORTE ET SERRURE MÉCANIQUE HAUTEUR 235</p> <p>CO-M21047MC</p> 	<p>TIROIR À TOXIQUE</p> <p>TIROIR À TOXIQUES BLANC AVEC PORTE ET SERRURE MÉCANIQUE HAUTEUR 075</p> <p>CO-M21045MC</p> 
<p>TIROIR PERCÉ</p> <p>TIROIR PERCÉ : COUVERCLES DU TIROIR À TOXIQUES BLANC AVEC CHARNIÈRE ET PATTES ARRIÈRES (NÉCESSI ...</p> <p>CO-M77873</p> 	<p>TIROIR PERCÉ</p> <p>TIROIR PERCÉ BLANC HAUTEUR 235</p> <p>CO-M77879</p> 	<p>TIROIR PERCÉ</p> <p>TIROIR PERCÉ BLANC HAUTEUR 155</p> <p>CO-M77878</p> 	<p>TIROIR PERCÉ</p> <p>TIROIR PERCÉ : COUVERCLES DU TIROIR À TOXIQUES BLANC SANS CHARNIÈRE AVEC PATTES ARRIÈRES (NÉCES ...</p> <p>CO-M77874</p> 	<p>TIROIR PERCÉ</p> <p>TIROIR PERCÉ BLANC HAUTEUR 075</p> <p>CO-M77877</p> 	<p>TIROIR PERCÉ</p> <p>TIROIR PERCÉ : COUVERCLES DU TIROIR À TOXIQUES BLANC SANS CHARNIÈRE - SANS PATTES ARRIÈRES</p> <p>CO-M77875</p> 	<p>PEIGNES POUR TIROIR</p> <p>PEIGNE TIROIR BLANC - HAUTEUR 235 LONG</p> <p>CO-M46027F6</p> 
<p>PEIGNES POUR TIROIR</p> <p>PEIGNE TIROIR BLANC - HAUTEUR 235 COURT</p> <p>CO-M46028F6</p> 	<p>PEIGNES POUR TIROIR</p> <p>PEIGNE TIROIR BLANC - HAUTEUR 075 LONG</p> <p>CO-M46034F6</p> 	<p>PEIGNES POUR TIROIR</p> <p>PEIGNE TIROIR BLANC - HAUTEUR 075 COURT SPECIAL PETER'S</p> <p>CO-PCP0570</p> 	<p>PEIGNES POUR TIROIR</p> <p>PEIGNE TIROIR BLANC - HAUTEUR 155 LONG</p> <p>CO-M46029F6</p> 	<p>PEIGNES POUR TIROIR</p> <p>PEIGNE TIROIR BLANC - HAUTEUR 075 COURT</p> <p>CO-M46035F6</p> 	<p>PEIGNES POUR TIROIR</p> <p>PEIGNE TIROIR BLANC - HAUTEUR 155 COURT</p> <p>CO-M46030F6</p> 	<p>BAC-TIROIR</p> <p>BAC TIROIR BLANC - 075 1/2</p> <p>CO-M77888</p> 

<p>BAC-TIROIR</p> <p>BAC TIROIR BLANC - 155 1/4</p> <p>CO-M24508MC</p> 	<p>BAC-TIROIR</p> <p>BAC TIROIR BLANC - 155 1/2</p> <p>CO-M77889</p> 	<p>BAC-TIROIR</p> <p>BAC TIROIR BLANC - 075 1/6</p> <p>CO-M24506MC</p> 	<p>BAC-TIROIR</p> <p>BAC TIROIR BLANC - 075 1/4</p> <p>CO-M24507MC</p> 	<p>BAC DE SÉPARATION</p> <p>BAC DE SÉPARATION BLANC - HAUTEUR 120 1/6 AVEC POIGNÉE LISSE</p> <p>CO-M24523MPL</p> 	<p>BAC DE SÉPARATION</p> <p>BAC DE SÉPARATION BLANC - HAUTEUR 120 1/6 AVEC POIGNÉE ET 5 RAINURES</p> <p>CO-M24523MP</p> 	<p>BAC DE SÉPARATION</p> <p>BAC DE SÉPARATION BLANC HAUTEUR 155 1/2</p> <p>CO-M77887</p> 
<p>BAC DE SÉPARATION</p> <p>BAC DE SÉPARATION BLANC HAUTEUR 075 1/2</p> <p>CO-M77886</p> 	<p>BAC DE SÉPARATION</p> <p>BAC DE SÉPARATION BLANC HAUTEUR 155 1/4 L</p> <p>CO-M24522MC</p> 	<p>BAC DE SÉPARATION</p> <p>BAC DE SÉPARATION BLANC - HAUTEUR 075 1/6 AVEC POIGNÉE</p> <p>CO-M24509MP</p> 	<p>BAC DE SÉPARATION</p> <p>BAC DE SÉPARATION BLANC - HAUTEUR 075 1/4 AVEC POIGNÉE</p> <p>CO-M24510MP</p> 	<p>BAC DE SÉPARATION</p> <p>BAC DE SÉPARATION BLANC HAUTEUR 075 1/4</p> <p>CO-M24510MC</p> 	<p>BAC DE SÉPARATION</p> <p>BAC DE SÉPARATION BLANC HAUTEUR 075 1/4 L</p> <p>CO-M24512MC</p> 	<p>BAC DE SÉPARATION</p> <p>BAC DE SÉPARATION BLANC HAUTEUR 155 1/6</p> <p>CO-M24523MC</p> 
<p>BAC DE SÉPARATION</p> <p>BAC DE SÉPARATION BLANC HAUTEUR 155 1/4</p> <p>CO-M24511MC</p> 	<p>BAC DE SÉPARATION</p> <p>BAC DE SÉPARATION BLANC HAUTEUR 075 1/6</p> <p>CO-M24509MC</p> 	<p>SÉPARATEURS</p> <p>SÉPARATEUR MOBILE BLANC - HAUTEUR 075 1/6</p> <p>CO-M24513MC</p> 	<p>SÉPARATEURS</p> <p>SÉPARATEUR MOBILE BLANC - HAUTEUR 075 1/4</p> <p>CO-M24514MC</p> 	<p>SÉPARATEURS</p> <p>BARRE DE LIAISON POUR SÉPARATEUR MOBILE BLANC (BAC DE SÉPARATION)</p> <p>CO-M24526MC</p> 	<p>SÉPARATEURS</p> <p>SÉPARATEUR MOBILE BLANC - HAUTEUR 155 1/4</p> <p>CO-M24515MC</p> 	<p>SÉPARATEURS</p> <p>SÉPARATEUR MOBILE BLANC HAUTEUR 155 1/6</p> <p>CO-M24525MC</p> 

Composants

SÉPARATEURS

**BARRE DE LIAISON POUR
SÉPARATEUR MOBILE
BLANC (BAC TIROIR)**

CO-M24530MC



SÉPARATEURS

**SÉPARATEUR MOBILE
BLANC HAUTEUR 120 1/6
POUR BAC 120/6 AVEC
POIGNÉE**

CO-M24525MS



BAC DE SUBDIVISION

**BOÎTE DE SUBDIVISION
BLANCHE - HAUTEUR 155
1/8**

CO-M24620MC



BAC DE SUBDIVISION

**BOÎTE DE SUBDIVISION
BLANCHE - HAUTEUR 075
1/18**

CO-M24615MC



BAC DE SUBDIVISION

**BOÎTE DE SUBDIVISION
BLANCHE - HAUTEUR 075
1/12**

CO-M24617MC



BAC DE SUBDIVISION

**BOÎTE DE SUBDIVISION
BLANCHE - HAUTEUR 075
1/8**


CO-M24618MC



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**PORTE-ÉTIQUETTE CACHE
BLANC LONGUEUR 160
(LOT DE 100)**


CO-M77915

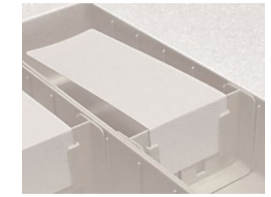

PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**PORTE-ÉTIQUETTE CACHE
BLANC LONGUEUR 160
(LOT DE 100)**


CO-M77915

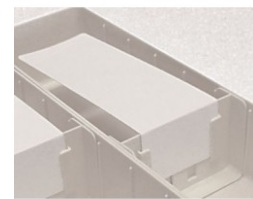

PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**PORTE-ÉTIQUETTE CACHE
BLANC - 2 CASES -
LONGUEUR 80 (LOT DE
100)**


CO-M77906

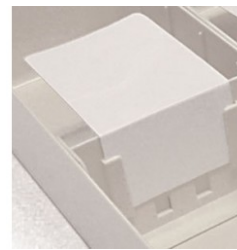

PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**PORTE-ÉTIQUETTE CACHE
BLANC - 2 CASES -
LONGUEUR 80 (LOT DE
100)**

CO-M77906

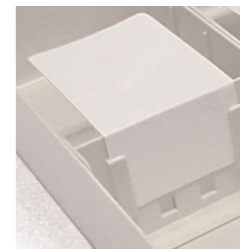

PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**PORTE-ÉTIQUETTE CACHE
BLANC - 1 CASE -
LONGUEUR 40 (LOT DE
100)**


CO-M77905



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**PORTE-ÉTIQUETTE CACHE
BLANC - 1 CASE -
LONGUEUR 40 (LOT DE
100)**

CO-M77905

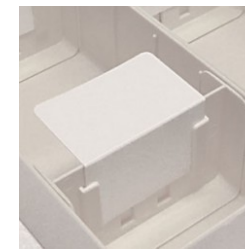

PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**PORTE-ÉTIQUETTE BLANC
VERTICAL UNIVERSEL (LOT
DE 10)**

CO-M77816V



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**PORTE-ÉTIQUETTE BLANC
VERTICAL UNIVERSEL (LOT
DE 10)**

CO-M77816V



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**PORTE-ÉTIQUETTE BLANC
HORIZONTAL UNIVERSEL
(VENDU PAR LOT DE 10)**

CO-M77816



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**PORTE-ÉTIQUETTE BLANC
HORIZONTAL UNIVERSEL
(VENDU PAR LOT DE 10)**

CO-M77816



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**SUPPORT ÉTIQUETTE
TRANSPARENT VERTICAL
(LOT DE 50)**


CO-M24534V



PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**SUPPORT ÉTIQUETTE
TRANSPARENT VERTICAL
(LOT DE 50)**


CO-M24534V

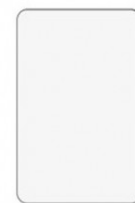

PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**SUPPORT ÉTIQUETTE
TRANSPARENT
HORIZONTAL (LOT DE 50)**


CO-M24534MZ

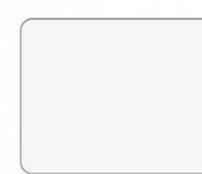

PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...

**SUPPORT ÉTIQUETTE
TRANSPARENT
HORIZONTAL (LOT DE 50)**

CO-M24534MZ

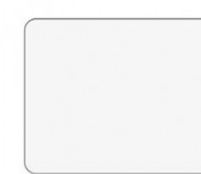
















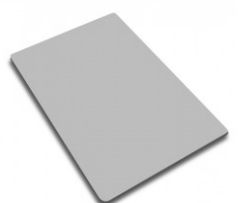
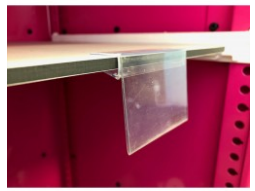



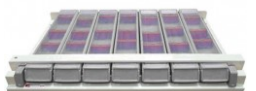
PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...


















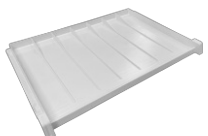



**SUPPORT ÉTIQUETTE
TRANSPARENT 1/6**

CO-M24610MZ



Composants

<p>PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...</p> <p>SUPPORT ÉTIQUETTE TRANSPARENT 1/6</p> <p>CO-M24610MZ</p> 	<p>PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...</p> <p>SUPPORT ÉTIQUETTE TRANSPARENT 1/4</p> <p>CO-M24611MZ</p> 	<p>PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...</p> <p>SUPPORT ÉTIQUETTE TRANSPARENT 1/4</p> <p>CO-M24611MZ</p> 	<p>PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...</p> <p>SUPPORT ÉTIQUETTE TRANSPARENT 1/2 (POUR TIROIR)</p> <p>CO-M77815</p> 	<p>PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...</p> <p>SUPPORT ÉTIQUETTE TRANSPARENT 1/2 (POUR TIROIR)</p> <p>CO-M77815</p> 	<p>PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...</p> <p>PORTE-ÉTIQUETTE BLANC 80 X 50 MM</p> <p>CO-M24535SZ</p> 	<p>PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...</p> <p>PORTE-ÉTIQUETTE BLANC 80 X 50 MM</p> <p>CO-M24535SZ</p> 
<p>ÉTIQUETTES POUR TIROIR</p> <p>ÉTIQUETTES BLEUES (LOT DE 5)</p> <p>CO-M77826</p> 	<p>ÉTIQUETTES POUR TIROIR</p> <p>ÉTIQUETTES JAUNES (LOT DE 5)</p> <p>CO-M77825</p> 	<p>ÉTIQUETTES POUR TIROIR</p> <p>ÉTIQUETTES ROUGES (VENDU PAR LOT DE 5)</p> <p>CO-M77827</p> 	<p>ÉTIQUETTES POUR TIROIR</p> <p>ÉTIQUETTES VERTES (LOT DE 5)</p> <p>CO-M77828</p> 	<p>ÉTIQUETTES POUR TIROIR</p> <p>ÉTIQUETTES BLANCHES POUR BOÎTE DE SUBDIVISION</p> <p>CO-M24532MC</p> 	<p>ÉTAGÈRES EN ABS</p> <p>ÉTAGÈRE BLANCHE F600 À CLASSEURS (14 INTERVALLES)</p> <p>CO-M77899</p> 	<p>ÉTAGÈRES EN ABS</p> <p>ÉTAGÈRE BLANCHE F600 À SOLUTÉS</p> <p>CO-M24505MS</p> 
<p>ÉTAGÈRES EN ABS</p> <p>ÉTAGÈRE BLANCHE F600 STANDARD</p> <p>CO-M24505MC</p> 	<p>ÉTAGÈRES EN COMPACT</p> <p>ÉTAGÈRE TRESPA F600</p> <p>CO-M77884</p> 	<p>PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...</p> <p>PORTE-ÉTIQUETTE POUR ÉTAGÈRE EN RÉSINE STRATIFIÉE</p> <p>CO-M77907</p> 	<p>ENSEMBLE PLATEAU PILULIER ...</p> <p>ENSEMBLE PLATEAU 7 BACS JOURNALIERS GRAND MODÈLE</p> <p>CO-MEC70002</p> 	<p>ENSEMBLE PLATEAU PILULIER ...</p> <p>ENSEMBLE PLATEAU 7 BACS JOURNALIERS MOYEN MODÈLE</p> <p>CO-MEC70001</p> 	<p>ENSEMBLE PLATEAU PILULIER ...</p> <p>PLATEAU BAC JOURNALIER BLANC</p> <p>CO-MEC70003</p> 	<p>ENSEMBLE PLATEAU PILULIER ...</p> <p>SYSTÈME OUVERTURE BLANC</p> <p>CO-SOBJ</p> 

<p>BAC JOURNALIER</p> <p>SÉPARATEUR MOYEN MODÈLE (UNITAIRE)</p> <p>CO-MEC70008</p> 	<p>BAC JOURNALIER</p> <p>SÉPARATEUR GRAND MODÈLE (UNITAIRE)</p> <p>CO-MEC70009</p> 	<p>BAC JOURNALIER</p> <p>BAC JOURNALIER TRANSPARENT GRAND MODÈLE</p> <p>CO-MEC70012</p> 	<p>BAC JOURNALIER</p> <p>BAC JOURNALIER TRANSPARENT MOYEN MODÈLE</p> <p>CO-MEC70011</p> 	<p>BAC JOURNALIER</p> <p>PILULIER SEUL AVEC COUVERCLE POUR TIROIRS JOINTIFS</p> <p>CO-MED038</p> 	<p>ENSEMBLE 8 PILULIERS</p> <p>ENSEMBLE PLATEAU 8 PILULIERS - MAUVE</p> <p>CO-M77900MA</p> 	<p>ENSEMBLE 8 PILULIERS</p> <p>PLATEAU PLUMIER - MAUVE</p> <p>CO-M77904MA</p> 
<p>ENSEMBLE 8 PILULIERS</p> <p>PILULIER PLUMIER - MAUVE</p> <p>CO-M77902MA</p> 	<p>ENSEMBLE 8 PILULIERS</p> <p>SÉPARATEUR POUR PILULIER PLUMIER (VERT OU MAUVE)</p> <p>CO-M77903</p> 	<p>PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...</p> <p>PORTE-ÉTIQUETTES TRANSPARENT MOYEN MODÈLE (LOT DE 50)</p> <p>CO-MEC80020</p> 	<p>PORTE-ÉTIQUETTES / SUPPORT-E ...</p> <p>PORTE-ÉTIQUETTES TRANSPARENT GRAND MODÈLE (LOT DE 50)</p> <p>CO-MEC80021</p> 	<p>ÉTIQUETTES POUR PILULIER</p> <p>LOT DE 35 PLANCHES DE 24 ÉTIQUETTES POUR PLATEAUX 8 PILULIERS (COLORIS PANACHÉS)</p> <p>CO-M77901</p> 	<p>ÉTIQUETTES POUR PILULIER</p> <p>ÉTIQUETTES AUTOCOLLANTES MOYEN MODÈLE (200 PLANCHES DE 27 SOIT 5400 ÉTIQUETTES)</p> <p>CO-MEZ80020</p> 	<p>ÉTIQUETTES POUR PILULIER</p> <p>ÉTIQUETTES AUTOCOLLANTES GRAND MODÈLE (200 PLANCHES DE 18 SOIT 3600 ÉTIQUETTES)</p> <p>CO-MEZ80021</p> 
<p>ÉTIQUETTES POUR PILULIER</p> <p>ÉTIQUETTES AUTOCOLLANTES MOYEN MODÈLE (50 PLANCHES DE 27 SOIT 1350 ÉTIQUETTES)</p> <p>CO-MEZ8002001</p> 	<p>ÉTIQUETTES POUR PILULIER</p> <p>ÉTIQUETTES AUTOCOLLANTES GRAND MODÈLE (50 PLANCHES DE 18 SOIT 900 ÉTIQUETTES)</p> <p>CO-MEZ8002101</p> 	<p>CASSETTE</p> <p>CASSETTE BLANCHE AVEC PORTE, VERROUILLAGE ET 2 POIGNÉES 3 NIVEAUX</p> <p>CO-M24627MC</p> 	<p>CASSETTE</p> <p>CASSETTE BLANCHE AVEC PORTE, VERROUILLAGE ET 2 POIGNÉES 2 NIVEAUX SPÉCIAUX</p> <p>CO-M24627MS</p> 	<p>CASSETTE</p> <p>CASSETTE BLANCHE AVEC PORTE ET VERROUILLAGE 3 NIVEAUX</p> <p>CO-M24626MC</p> 	<p>CASSETTE</p> <p>CASSETTE BLANCHE AVEC PORTE, VERROUILLAGE ET 2 POIGNÉES 2 NIVEAUX</p> <p>CO-M24624MC</p> 	<p>CASSETTE</p> <p>CASSETTE BLANCHE AVEC PORTE ET VERROUILLAGE 2 NIVEAUX</p> <p>CO-M24623MC</p> 

Composants

CASSETTE

**CASSETTE BLANCHE AVEC
PORTE ET VERROUILLAGE 1
NIVEAU**

CO-M24623MS



CASSETTE

**CASSETTE BLANCHE SANS
PORTE 2 NIVEAUX**

CO-M24622MC



CASSETTE

**CASSETTE BLANCHE SANS
PORTE 3 NIVEAUX**

CO-M24625MC



CASSETTE

**CASSETTE BLANCHE AVEC
PORTE, VERROUILLAGE ET
2 POIGNÉES 1 NIVEAU**

CO-M24624MS



PORTE-ETIQUETTES / SUPPORT É...

**POCHETTE
AUTOCOLLANTE
TRANSPARENTE A4 (LOT
DE 5)**


CO-M77859



PORTE-ETIQUETTES / SUPPORT É...

**SUPPORT AUTOCOLLANT
POUR SUPPORT-
ÉTIQUETTE TRANSPARENT
(LOT DE 5)**

CO-M77880

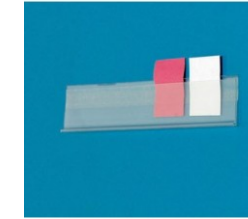

Décors



EXOTIQUE BLEU



PLUM PURPLE



QUARTZ



LIMON



RED CANDY




RICE PAPER

Une maintenance préventive qui s'adapte à vous


La maintenance des dispositifs médicaux n'est pas seulement une **obligation technique**, mais aussi une **responsabilité légale** et réglementaire de l'établissement.

Elle repose sur :

- Une politique claire
- Des procédures de traçabilité
- L'utilisation de pièces conformes
- Et la qualification du personnel

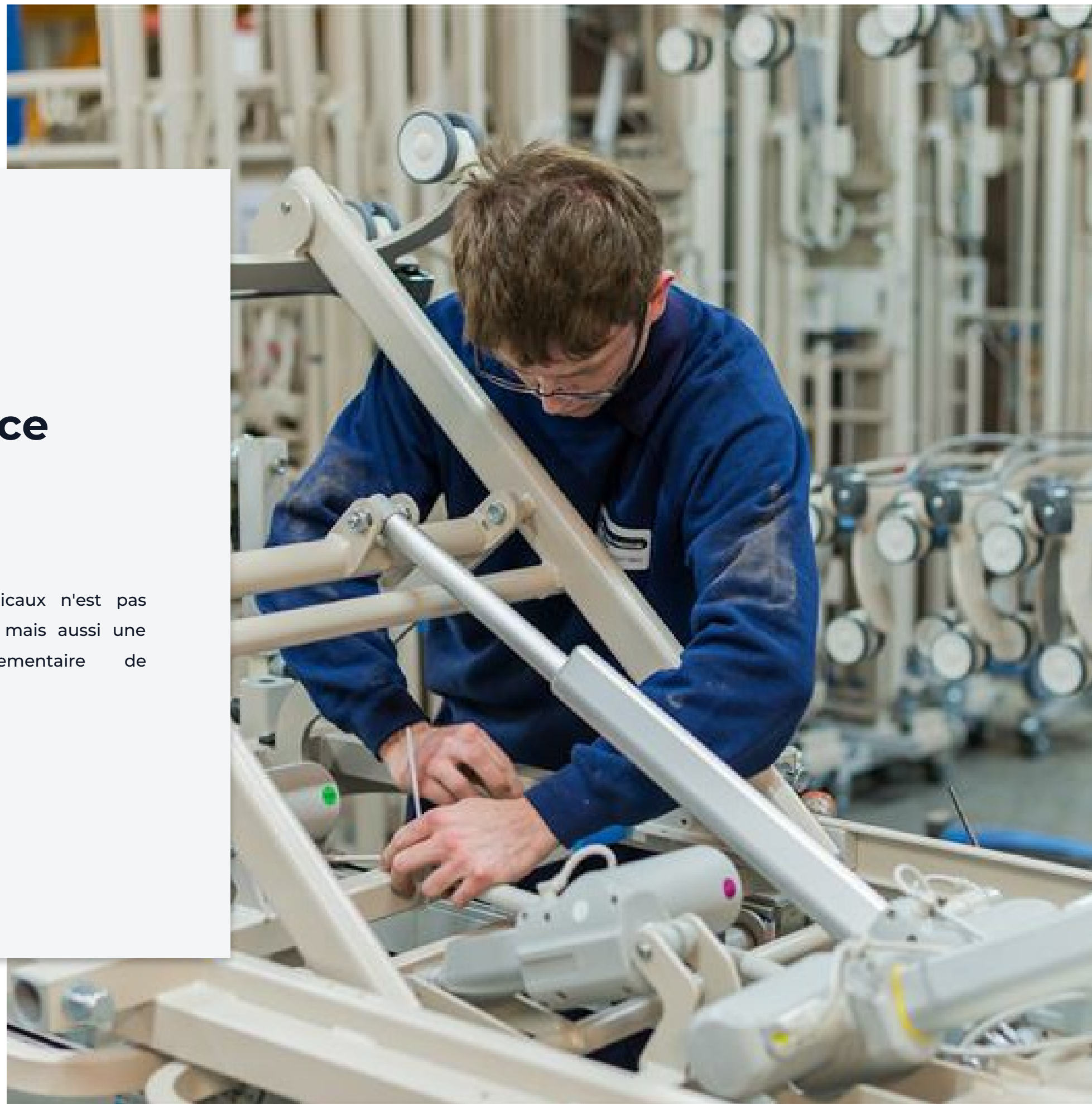

Les avantages de la maintenance préventive

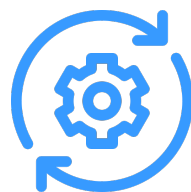

LES AVANTAGES D'UNE MAINTENANCE RÉGULIÈRE DE VOS ÉQUIPEMENTS

- Plus de performance : disponibilité maximale du parc.
- Plus de qualité : un service fiable et continu.
- Moins de dépenses : réduction des coûts de réparation.
- Moins de pannes : continuité assurées.



ALLONGER LA DURÉE DE VIE DE VOS ÉQUIPEMENTS & GARANTIR LA SÉCURITÉ

- Nos programmes de maintenance sont pensés pour :
- Exploiter pleinement les performances de vos équipements.
 - Assurer des contrôles réguliers et des diagnostics fiables.
 - Préserver la sécurité des patients, résidents et soignants.
 - Maintenir la conformité réglementaire de votre établissement.



UN BUDGET SOUS CONTRÔLE

- Nos solutions de maintenance vous aident à :
- Anticiper vos dépenses.
 - Éviter les coûts imprévus.
 - Optimiser vos investissements en toute transparence.



DES PIÈCES CERTIFIÉES POUR UNE FAISABILITÉ DURABLE

- Toutes nos interventions sont réalisées avec des pièces d'origine, testées et validées garantissant :
- La sécurité maximale lors de l'utilisation de vos équipements.
 - Le respect strict des normes réglementaires.
 - La longévité et la fiabilité de vos lits, matelas et accessoires.

Nos prestations de maintenance préventive



UN INTERLOCUTEUR UNIQUE POUR UNE SOLUTION COMPLÈTE

De l'avant-vente à l'après-vente, nous vous accompagnons à chaque étape.

Grâce à une **analyse précise** de vos besoins, nous mettons en place un **support technique** sur-mesure, fondé sur une **collaboration durable** et **efficace**.

DES EXPERTS À VOS CÔTÉS

Nos techniciens et ingénieurs, régulièrement formés aux dernières innovations, vous assurent :

- Un service réactif et de haute qualité.
- Une installation professionnelle de vos équipements.
- La formation complète de vos équipes, directement sur site.

NOS TECHNICIENS RÉALISENT UNE VÉRIFICATION COMPLÈTE

- Contrôle mécanique : assemblage, articulations, freins, verrouillages.
- Contrôle électronique : composants, commandes, capteurs.
- Points de sécurité : barrières, systèmes de blocage, dispositifs de protection.
- Lubrification : regraissage de tous les points de pivot.
- Tests électriques : réalisés conformément aux normes en vigueur.

Chaque opération (contrôle, réglage, remplacement) est consignée dans le rapport de maintenance du technicien.

REMISE EN ÉTAT DU PARC

A l'issue de la visite, notre service de maintenance préventive vous enverra par mail le **rapport de maintenance** complété pour chaque équipement.

Les **fiches d'intervention** sont transmises à votre interlocuteur HAcare qui établit les devis nécessaires pour les réparations ou remplacements.

Vous disposez ainsi d'un **suivi complet** et **transparent** de la **maintenance** de votre parc.

Résultat : un processus clair et tracé, qui garantit la sécurité, la conformité et la disponibilité de vos équipements.



Z.I. Nord 14 rue des forges
86200 - Loudun

Tél +33 (0)1 42 84 01 15
adv.allibert@hacare.com



Stéphane HARDOIN
Responsable Ventes France
s.hardoin@hacare.com
07 44 73 69 53



Administration des ventes
adv.allibert@hacare.com
+33 (0)1 42 84 01 15



Julien FROMENT
Corse
contact@syneris-sante.com
06 99 85 93 21



Anthony GONZALES
Sud Est
a.gonzales@hacare.com
06 22 27 71 47



Stéphane HARDOIN
Grand-Est
s.hardoin@hacare.com
07 44 73 69 53



Stéphane HARDOIN
Nord - Paris - Normandie
s.hardoin@hacare.com
07 44 73 69 53



Antoine MARIOT
Sud Ouest
a.mariot@hacare.com
07 45 29 16 99



Béatrice PAZZINI
Aquitaine
sud.ouest.hospitalier@wanadoo.fr
05 56 34 81 93



Marine POINT
Nord Ouest
m.point@hacare.com
06 27 47 71 35



HAcare
MEDICAL

1860

